

Melilax

MICROCLISMA CON PROMELAXIN®



COMPLESSO ATTIVO
DI MIELI
E POLISACCARIDI
DA ALOE E MALVA

Soffietto esclusivo
Easy Use
+ facile da applicare

FORMULA BREVETTATA

Doppia azione
Libera l'intestino senza irritare,
proteggendo la mucosa rettale

senza
glutine
gluten
free

DISPOSITIVO MEDICO
Classe IIb

Melilax è un **microclisma innovativo a base di miele**, che unisce un'equilibrata azione evacuante ad un'azione protettiva e lenitiva della mucosa rettale, utile per contrastare i fastidi, l'irritazione e l'infiammazione, presenti in caso di stipsi.

La **doppia azione di Melilax** è ottenuta grazie a **PROMELAXIN®**, un complesso attivo di mieli di nettare e di melata appositamente selezionati e lavorati in base al loro contenuto di monosaccaridi, polisaccaridi e melanoidine, arricchito con la **frazione polisaccaridica** da Aloe e Malva.

COME AGISCE

Melilax esplica un'azione evacuante non irritante e quindi induce uno stimolo fisiologico e bilanciato di attivazione della defecazione.

Inoltre **Melilax**, grazie alle sue proprietà mucosimili e alla sua viscosità, protegge la mucosa rettale durante il passaggio delle feci, mimando l'azione lubrificante del muco fisiologico.

Queste particolari proprietà, unite all'azione antiossidante, conferiscono al prodotto la capacità di proteggere e lenire la mucosa, esplicando un'azione antinfiammatoria indiretta dovuta alle caratteristiche fisiche del prodotto.

INDICAZIONI

Melilax è indicato nel trattamento della stipsi, anche in presenza di ipersensibilità viscerale (come in caso di colon irritabile), ragadi ed emorroidi.

Il prodotto è adatto anche all'uso in gravidanza, allattamento e nei lattanti.

COMPOSIZIONE

Sostanze funzionali 73,2%


Promelaxin® complesso attivo di mieli e polisaccaridi da Aloe e Malva

Titolo in: monosaccaridi ≥ 50%, polisaccaridi (Peso Molecolare >20.000 Dalton) ≥ 0,3%


Contiene inoltre: miscela idroglicerica, succo di Limone, olio essenziale di Lavanda.

MODO D'USO

1) Aprire il microclisma rimuovendo il copricannula di sicurezza:

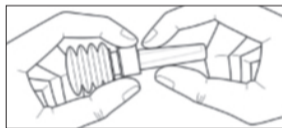

- Afferrare la ghiera rotonda bianca posta sopra il soffietto
- Con l'altra mano piegare il copricannula fino a provocarne la rottura e il completo distacco dalla ghiera

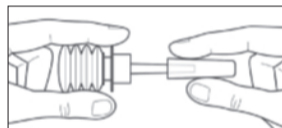

- Sfilare il copricannula

2) Applicare qualche goccia di prodotto nella zona perianale e introdurre delicatamente la cannula nel retto.

3) Premere a fondo il microclisma e al termine dell'applicazione mantenerlo premuto fino ad estrazione completa della cannula, per evitare che il prodotto venga riaspirato.



MELILAX ADULTI



Indicato per adulti e ragazzi a partire da 12 anni di età. Adatto anche in gravidanza e allattamento.

POSOLOGIA

1 Microclisma da 10 g al bisogno.

In caso di stipsi ostinata, applicare 2 dosi consecutivamente.

Confezione da 6 microclismi monouso con copricannula per adulti e ragazzi da 10 g ciascuno

MELILAX PEDIATRIC



Confezione da 6 microclismi monouso con copricannula per bambini e lattanti da 5 g ciascuno

Indicato per bambini e lattanti.

Per facilitare l'applicazione del microclisma è preferibile posizionare il bambino sul lato sinistro con le ginocchia piegate verso l'addome.



POSOLOGIA

Bambini da 3-12 anni:

1 microclisma da 5 g al bisogno.

In caso di stipsi ostinata, applicare 2 dosi consecutivamente.

Bambini da 1-3 anni:

1 microclisma da 5 g al bisogno.

Lattanti da 0-1 anno:

metà microclisma da 5 g al bisogno.

AVVERTENZE

Non utilizzare se presente ipersensibilità o allergia individuale verso uno o più componenti.

In caso di stipsi persistente è importante consultare il medico per escludere altre patologie.

Il microclisma è monouso, pertanto non deve essere riutilizzato qualora se ne somministri metà dose, come nel caso dei lattanti.

Conservare a temperatura ambiente, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Tenere fuori dalla portata dei bambini. La data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato.

SCADENZA

Vedere la scadenza riportata sulla confezione. Non utilizzare dopo la data di scadenza indicata.

CONFEZIONE VENDITA

Melilax Adulti: 6 microclismi monouso con copricannula per adulti e ragazzi da 10 g ciascuno

Melilax Pediatric: 6 microclismi monouso con copricannula per bambini e lattanti da 5 g ciascuno

LA STIPSI

Il termine "stipsi" è impiegato per indicare sostanzialmente un aumento del tempo di permanenza delle feci nell'ultima parte dell'intestino. In questa condizione si ha un accumulo di materiale fecale asciutto e duro a causa di un eccessivo riassorbimento dei liquidi: le feci hanno scarso volume, vengono emesse in **maniera infrequente** (anche meno di 3 evacuazioni alla settimana) e con **difficoltà e/o dolore** (a causa delle feci dure). In alcuni casi la stipsi si può manifestare anche con una sensazione di evacuazione non completa nonostante una frequenza normale o con la necessità di sforzarsi molto per evacuare.

LE CAUSE

Le principali cause all'origine del problema, in qualunque fascia di età, possono essere uno **scorretto stile di vita** (alimentazione non equilibrata, insufficiente assunzione di acqua, verdura e frutta, scarsa attività fisica e vita sedentaria), **cambiamenti delle proprie abitudini personali o delle condizioni climatiche** (come ad esempio in caso di viaggi), **uso di alcuni farmaci, presenza di malattie gastrointestinali o metaboliche** (come la sindrome dell'intestino irritabile), oppure **particolari condizioni quali stress, immobilità-allettamento (soprattutto negli anziani)**.

Emorroidi, ragadi e prolassi possono causare stipsi o possono esserne una conseguenza. La difficoltà di evacuazione e l'irritazione locale innescano, infatti, un circolo vizioso che impedisce sia la risoluzione della stipsi sia il miglioramento dei problemi associati.

Una causa frequente di stipsi è il **controllo volontario dello stimolo di evacuare**, problema frequente nei bambini, soprattutto nei primi 2-3 anni di vita. Nei bambini, inoltre, si può manifestare anche **durante stati febbrili prolungati** che possono provocare lievi condizioni di disidratazione.

CONSIGLI UTILI

In molti casi la stipsi può essere corretta con una dieta ricca di acqua e fibre: queste infatti legano in varia misura l'acqua e contribuiscono ad aumentare il volume delle feci. È inoltre utile una regolare attività fisica.



www.melilax.it



0373

Data ultima revisione: Febbraio 2016



Aboca S.p.A. Società Agricola - Loc. Aboca, 20 - 52037 Sansepolcro (AR) - Italia
www.aboca.com

Azienda con sistema di gestione qualità ISO 9001 e ISO 13485 e sistema di gestione ambientale ISO 14001 certificati.