

Melilax

MICROLAVEMENT AVEC PROMELAXIN

FORMULE BREVETÉE



Soufflet exclusif
Easy Use
+ facile à utiliser

Double Action
Il libère l'intestin sans irriter,
en protégeant la muqueuse rectale

gluten free

DISPOSITIF MÉDICAL
Classe IIb

Melilax est un **microlavement innovant à base de miel**, qui associe une action évacuante équilibrée à une action protectrice et apaisante de la muqueuse rectale, utile pour lutter contre les gênes, l'irritation et l'inflammation, présentes en cas de constipation.

La **double action de Melilax** est obtenue grâce à **PROMELAXIN**, un complexe actif de miels de nectar et de miellat spécialement sélectionnés et traités selon leur contenu en monosaccharides, polysaccharides et mélanoidines, enrichi avec la **fraction polysaccharidique** d'Aloe et Mauve.

COMMENT AGIT-IL ?

Melilax exerce une action évacuante non irritante et génère donc un stimulus d'activation de la défécation physiologique et équilibré.

En outre **Melilax**, grâce à ses propriétés similaires au mucus et à sa viscosité, protège la muqueuse rectale durant le passage des selles, en imitant l'action lubrifiante du mucus physiologique.

Ces propriétés particulières, associées à l'action antioxydante, apportent au produit la capacité de protéger et d'apaiser la muqueuse, en exerçant une action anti-inflammatoire indirecte due aux caractéristiques physiques du produit.

INDICATIONS

Melilax est indiqué dans le traitement de la constipation, même en présence d'hypersensibilité viscérale (comme dans le cas du côlon irritable), fissures et hémorroïdes.

Le produit peut être également utilisé durant la grossesse, l'allaitement, et chez les nourrissons.

COMPOSITION

Substances fonctionnelles 73,2%


Promelaxin complexe actif de miels et polysaccharides d'Aloe et Mauve

Titre en : monosaccharides $\geq 50\%$, polysaccharides (Masse Moléculaire >20.000 Dalton) $\geq 0,3\%$


Contient aussi : mélange hydroglycériné, jus de Citron, huile essentielle de Lavande.

MODE D'EMPLOI

1) Ouvrir le microlavement en retirant le capuchon de sécurité de la canule :

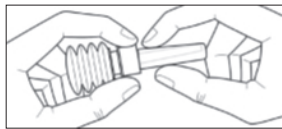

- Saisir la bague ronde blanche située au-dessus du soufflet
- À l'aide de l'autre main, plier le capuchon de la canule jusqu'à en provoquer la rupture et la séparation totale de la bague

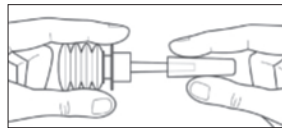

- Enlever le capuchon de la canule

2) Appliquer quelques gouttes de produit dans la zone péri-anale et introduire délicatement la canule dans le rectum.

3) Presser à fond le microlavement et à la fin de l'application, le tenir pressé jusqu'à la complète extraction de la canule, pour éviter que le produit soit à nouveau aspiré.



MELILAX ADULT



Boîte de 6 microlavements à usage unique avec capuchon de canule pour adultes et adolescents de 10 g chacun

Indiqué pour les adultes et les adolescents à partir de 12 ans. Il peut être également utilisé durant la grossesse et l'allaitement.

POSOLOGIE

1 microlavement de 10 g au besoin.

En cas de constipation persistante, appliquer 2 doses consécutivement.

MELILAX PEDIATRIC



Boîte de 6 microlavements à usage unique avec capuchon de canule pour enfants et nourrissons de 5 g chacun

Indiqué pour les enfants et les nourrissons.

Pour faciliter l'application du microlavement, il est préférable de positionner l'enfant sur le côté gauche avec les genoux pliés sur l'abdomen.



POSOLOGIE

Enfants de 3 à 12 ans :

1 microlavement de 5 g au besoin.

En cas de constipation persistante, appliquer 2 doses consécutivement.

Enfants de 1 à 3 ans :

1 microlavement de 5 g au besoin.

Nourrissons de 0 à 1 an :

1 demi-microlavement de 5 g au besoin.

MISES EN GARDE

Ne pas utiliser le produit en cas d'hypersensibilité ou d'allergie individuelle envers un ou plusieurs des composants. En cas de constipation persistante, il est important de consulter le médecin pour écarter d'autres pathologies. Le microlavement est à usage unique, par conséquent il ne doit pas être réutilisé en cas de prise d'une demi-dose, comme pour les nourrissons.

Conserver à température ambiante, loin de toute source de chaleur et à l'abri de la lumière. Tenir hors de portée des enfants. La date de péremption se réfère au produit intact et conservé correctement.

PÉREMPTION

Voir la date de péremption indiquée sur l'emballage. Ne pas utiliser après la date de péremption indiquée.

EMBALLAGE DE VENTE

Melilax adult : 6 microlavements à usage unique avec capuchon de canule pour adultes et adolescents de 10 g chacun

Melilax Pediatric : 6 microlavements à usage unique avec capuchon de canule pour enfants et nourrissons de 5 g chacun

LA CONSTIPATION

Le terme "constipation" est utilisé pour indiquer substantiellement une augmentation de la durée de présence des selles dans la dernière partie de l'intestin. Cette condition génère une accumulation de matières fécales sèches et dures en raison d'une réabsorption des liquides : les selles ont peu de volume, sont évacuées de **manière peu fréquente** (jusqu'à moins de 3 évacuations par semaine) et avec **difficulté et/ou douleur** (à cause des selles dures). Dans certains cas, la constipation peut également se manifester avec une sensation d'évacuation incomplète malgré une fréquence normale ou avec la nécessité de faire beaucoup d'efforts pour évacuer.

LES CAUSES

Les causes principales à l'origine du problème, quelle que soit la tranche d'âge, peuvent être **un style de vie inapproprié** (alimentation non équilibrée, consommation insuffisante d'eau, de fruits et légumes, activité physique insuffisante et vie sédentaire), **changements d'habitudes personnelles ou des conditions climatiques** (comme par exemple lors des voyages), **utilisation de certains médicaments, présence de maladies gastro-intestinales ou métaboliques** (comme le syndrome du côlon irritable), ou **bien de conditions particulières telles que le stress, l'immobilité, l'alitement (surtout chez les personnes âgées)**.

Hémorroïdes, fissures et prolapsus peuvent causer la constipation ou peuvent en être une conséquence. L'évacuation difficile et l'irritation locale déclenchent en effet un cercle vicieux qui empêche à la fois le règlement de la constipation et l'amélioration des problèmes liés.

Une cause fréquente de la constipation est le **contrôle volontaire du stimulus d'évacuer**, un problème fréquent chez les enfants, surtout durant les deux ou trois premières années de leur vie. Chez les enfants, elle peut se manifester également **durant des états fébriles prolongés**, pouvant provoquer de légères conditions de déshydratation.

CONSEILS UTILES

Dans de nombreux cas, la constipation peut être corrigée avec un régime riche en eau et en fibres : celles-ci se lient en effet à l'eau à des degrés variables et contribuent à augmenter le volume des selles. Il est également conseillé de pratiquer une activité physique régulière.



www.melilax.fr



0373

Date de la dernière révision : 02/2016



Aboca S.p.A. Società Agricola - Loc. Aboca, 20 - 52037 Sansepolcro (AR) - Italia
www.aboca.com

Entreprise avec système de management de la qualité ISO 9001 et ISO 13485
et système de management environnemental ISO 14001 certifiés.