


Oroben

- άφθες • ουλίτιδες • μικροτραυματισμοί
- καθημερινή στοματική υγιεινή

**Μειώνει τον πόνο, προστατεύει
και ευνοεί την ίαση**
ΣΤΟΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ

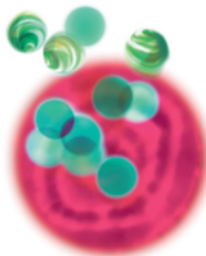

με **Resinox[®] FP**,
φυσικό μοριακό σύμπλοκο πολυσακχαριτών,
ρητινών και φλαβονοειδών

100%
ΦΥΣΙΚΟ

gluten
free

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ

ΜΕ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ Κατηγορία IIa

Το **στοματικό διάλυμα Oroben** είναι ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν που μειώνει τον πόνο και ευνοεί την ίαση άφθων, περιοδικής αφθώδους στοματίτιδας, φλεγμονής των ούλων και μικροτραυματισμών του στόματος που οφείλονται, για παράδειγμα, σε οδοντιατρική θεραπεία ή στη χρήση ορθοδοντικών συσκευών και οδοντοστοιχιών.

ΠΩΣ ΔΡΑ

Το στοματικό διάλυμα Oroben δρα χάρη στο **Resinox FP**, ένα φυσικό μοριακό σύμπλοκο, καρπός της Έρευνας Aboca, αποτελούμενο από πολυσακχαρίτες, ρητίνες και φλαβονοειδή που δημιουργούν έναν ενεργό φραγμό διπλής δράσης πάνω στον βλεννογόνο:

1. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ-ΕΝΥΔΑΤΙΚΗ

Σχηματίζει ένα προσκολλητικό φιλμ επάνω στο τραύμα ή στην περιοχή φλεγμονής, που περιορίζει την επαφή με εξωτερικούς παθογόνους ή ερεθιστικούς παράγοντες, οι οποίοι εμποδίζουν τη φυσική διαδικασία ίασης και ιστικής αναγέννησης.

2. ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ

Προστατεύει τον βλεννογόνο από την ερεθιστική δράση των ελεύθερων ριζών.

Χάρη σε αυτούς τους μηχανισμούς, το προϊόν ασκεί **μία έμμεση αντιφλεγμονώδη δράση** και ευνοεί την ιστική επιδιόρθωση μειώνοντας τους χρόνους ίασης.

Επιπλέον, το αιθέριο έλαιο μέντας, ασκεί δροσιστική δράση αφήνοντας μια ευχάριστη αίσθηση φρεσκάδας στο στόμα, και είναι χρήσιμο για τη μείωση της κακοσμίας του στόματος, η οποία συχνά συνοδεύει την ουλίτιδα.

Το στοματικό διάλυμα Oroben φθάνει σε κάθε μέρος της στοματικής κοιλότητας, μέσω ξεπλύματος και γαργάρων. Επιτρέπει την απομάκρυνση των ερεθιστικών παραγόντων και επομένως ευνοεί τον έλεγχο του μικροπεριβάλλοντος, την υγιεινή και την προστασία του στόματος.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Ειδικό βοήθημα για τη θεραπεία αφθών, περιοδικής αφθώδους στοματίτιδας και φλεγμονής των ούλων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε περίπτωση μικροτραυματισμών του στόματος, που οφείλονται, για παράδειγμα, σε οδοντιατρική θεραπεία ή στη χρήση ορθοδοντικών συσκευών και οδοντοστοιχιών. Σε περίπτωση ιδιαίτερης ευαισθησίας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως προληπτική προστασία του στοματικού βλεννογόνου, ακόμη και για παρατεταμένες περιόδους. Κατάλληλο και για παιδιά άνω των 6 ετών. Αβλαβές αν καταποθεί κατά λάθος κατά την εφαρμογή.

Λόγω υψηλής συγκέντρωσης λειτουργικών ουσιών μπορεί να σχηματιστεί ελαφρύ ίζημα στο κάτω μέρος της φιάλης. Μια ελαφριά ανάδευση αρκεί για να επιτευχθεί η ομοιογενής διασπορά.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ανακινήστε τη φιάλη πριν από τη χρήση. Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε περίπου 10 ml στοματικού διαλύματος, μετρημένο με την ειδική μεζούρα, 2 ή 3 φορές την ημέρα, ξεπλύνοντας και κάνοντας γαργάρες για τουλάχιστον ένα λεπτό. Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως είναι ή αραιωμένο σε λίγο νερό.

Για χρήση από παιδιά, συνιστάται το αραιωμένο προϊόν.

Αποφύγετε τη λήψη ποτών ή φαγητού για τουλάχιστον 15 λεπτά μετά την εφαρμογή, για να επιτευχθεί η προσκόλληση στον βλεννογόνο. Μετά τη χρήση, κλείστε καλά τη φιάλη και πλύνετε σχολαστικά τη δοσομετρική μεζούρα.

ΣΥΝΘΕΣΗ

Λειτουργικές ουσίες: Resinox FP, φυσικό μοριακό σύμπλοκο πολυσακχαριτών (από Αλόη βέρα*), φλαβονοειδή (από Χαμομήλι*) και ρητίνες (από Μύρο).

Επιπλέον περιέχει: Υδροαλκοολικό διάλυμα, Φυτική γλυκερίνη, Αιθυλική αλκοόλη από βιολογικό σιτάρι*, Αιθέριο έλαιο Πιπερώδους μέντας, Φυσικά αρώματα, Εκχύλισμα γλυκόριζας*, Κόμμι Ξανθάνης.

*Συστατικό βιολογικής γεωργίας

Δεν περιέχει συντηρητικά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας ή μεμονωμένης αλλεργίας σε ένα ή περισσότερα συστατικά.


Να φυλάσσεται σε ξηρό και δροσερό περιβάλλον, μακριά από πηγές θερμότητας και να προστατεύεται από το φως. Να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά. Η ημερομηνία λήξης αναφέρεται σε προϊόν ακέραιο και σωστά διατηρημένο.

Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, συμβουλευτείτε τον γιατρό για να αποκλείσετε ενδεχόμενα συστημικά αίτια, ή οδοντικής προέλευσης, που απαιτούν άλλα είδη θεραπείας.

ΛΗΞΗ

Δείτε τη λήξη που αναγράφεται στη συσκευασία. Να μην χρησιμοποιείται μετά την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε το προϊόν σε διάστημα 6 μηνών αφού το ανοίξετε.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Γυάλινη φιάλη των 150 ml.

Περιέχει δοσομετρική μεζούρα  0373

Υδρίτες 150 ml - Άνυδρα 30 ml

Lic. UTF IT00PG - A00035A - Αλκοόλ 20% vol.

Ολοκληρώνει τη σειρά στοματικής γέλης Oroben.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: 11/2018

ΑΦΘΕΣ, ΟΥΛΙΤΙΔΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ

Ο στοματικός βλεννογόνος και τα ούλα μπορούν να υπόκεινται σε οξείες φλεγμονώδεις καταστάσεις, συχνά υποτροπιάζουσες ή χρόνιες, όπως στοματίτιδες, ουλίτιδες και μικροτραυματισμοί.

Η αφθώδη στοματίτιδα, κοινώς γνωστή ως άφθα, είναι μία εντοπισμένη και μεταβλητών διαστάσεων εξέλκωση που ενέχει ένα ή περισσότερα σημεία του βλεννογόνου στο εσωτερικό της στοματικής κοιλότητας. Αυτού του είδους η εξέλκωση είναι εν γένει αυτοπεριοριζόμενη, δηλαδή τείνει να θεραπεύεται αυθόρμητα μέσα σε μία ή δύο εβδομάδες, ωστόσο είναι συνήθως υποτροπιάζουσα και πολύ επώδυνη, τόσο ώστε να δημιουργεί δυσκολίες στη βρώση, στην πόση ή στην ομιλία.

Οι πιο διαδεδομένες φλεγμονώδεις καταστάσεις μπορούν να ενέχουν, αντιθέτως, τα ούλα και να είναι η συνέπεια μίας εσφαλμένης στοματικής υγιεινής (συσσώρευση πλάκας ή εσφαλμένη χρήση της οδοντόβουρτσας και του οδοντικού νήματος), οδοντιατρικής θεραπείας ή χρήσης συσκευών ή οδοντοστοιχιών των οποίων η χρήση μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει ακόμα και μικροτραυματισμούς που προσβάλουν τα ούλα ή άλλα σημεία του βλεννογόνου στο εσωτερικό της στοματικής κοιλότητας.



 0477



Aboca S.p.A. Società Agricola - Loc. Aboca, 20 - 52037 Sansepolcro (AR) - Italia
www.aboca.com

Εταιρεία με πιστοποιημένα συστήματα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 και ISO 13485 και περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001.