

# Leviacelis



ΕΝΕΡΓΟ ΣΥΜΠΛΟΚΟ  
ΑΠΟ ΜΕΛΙ ΚΑΙ  
ΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡΙΔΙΑ  
ΑΛΟΗΣ ΚΑΙ ΜΟΛΟΧΑΣ

Αποκλειστικό  
πούαρ

Easy  
Use  
για πιο εύκολη  
εφαρμογή

ΜΙΚΡΟΚΛΥΣΜΑ ΜΕ PROMELAXIN

EU PATENT GRANTED

EP2919857B1

Διπλή δράση

Απελευθερώνει το έντερο χωρίς να ερεθίζει,  
προστατεύοντας τον ορθικό βλεννογόνο

gluten  
free

Κατάλληλο για άτομα  
με κοιλιοκάκη

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ Κατηγορία IIb

**GR** Το **Leviacelis** είναι ένα **καινοτόμο μικροκλύσμα με βάση το μέλι**, που συνδυάζει μια ισορροπημένη υπακτική δράση με ιδιότητες που δρουν προστατευτικά και καταπραυντικά προς τον ορθικό βλεννογόνο, χρήσιμο για την αντιμετώπιση των ενοχλήσεων, του ερεθισμού και της φλεγμονής που εμφανίζονται κατά τη δυσκοιλιότητα.

Η **διπλή δράση του Leviacelis** οφείλεται στο **PROMELAXIN**, ένα ενεργό σύμπλοκο μελιών από νέκταρ και από μελιτώματα, η προσεκτική επιλογή και επεξεργασία των οποίων γίνεται βάσει της περιεκτικότητάς τους σε μονοσακχαρίδια, πολυσακχαρίδια και μελανοϊδίνες, και το οποίο εμπλουτίζεται από **πολυσακχαριδικό κλάσμα** αλόης και μολόχας.

## ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Το **Leviacelis** ενδείκνυται για την καταπολέμηση της δυσκοιλιότητας, ακόμα και παρουσία σπλαχνικής υπερευαισθησίας (π.χ. ευερέθιστο κόλον), ραγάδων και αιμορροϊδων.

Το προϊόν είναι, επίσης, κατάλληλο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της γαλουχίας, καθώς και για τα βρέφη.


## ΠΩΣ ΔΡΑ

Το **Leviacelis** ασκεί υπακτική δράση που δεν ερεθίζει ενώ προάγει τη φυσιολογική και ισορροπημένη ενεργοποίηση της αφόδευσης.


Επίσης, το **Leviacelis**, χάρη στις βλεννο-προσομοιάζουσες ιδιότητές του και το ιξώδες του, προστατεύει τον ορθικό βλεννογόνο κατά τη διέλευση των κοπράνων, προσομοιώνοντας τη λιπαντική δράση της φυσιολογικής βλέννης. Αυτές οι ειδικές ιδιότητες, μαζί με την αντιοξειδωτική δράση, προσδίδουν στο προϊόν την ικανότητα να προστατεύει και να απαλύνει τον βλεννογόνο ασκώντας έμμεσο αντιφλεγμονώδη ρόλο που οφείλεται στα φυσικά χαρακτηριστικά του προϊόντος.

## ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1) Ανοίξετε το μικροκλύσμα αφαιρώντας το πώμα ασφαλείας:

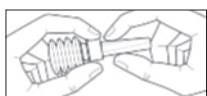

- Πιάστε σταθερά τον δακτύλιο που βρίσκεται πάνω στο πούαρ
- Με το άλλο χέρι διπλώστε το πώμα ασφαλείας μέχρι να σπάσει και να βγει από τον δακτύλιο

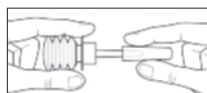

- Αφαιρέστε το πώμα ασφαλείας

2) Απλώστε μερικές σταγόνες προϊόντος στην περιπρωκτική περιοχή και εισάγετε απαλά το ρύγχος στον ορθό.

3) Πατήστε μέχρι τέλους το μικροκλύσμα και στο τέλος της εφαρμογής κρατήστε πατημένο μέχρι να αφαιρέσετε εντελώς το ρύγχος ώστε να αποφύγετε την επαναρρόφηση του προϊόντος.

## ΠΡΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Να μη χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας ή μεμονωμένης αλλεργίας σε ένα ή περισσότερα συστατικά. Σε περίπτωση επίμονης δυσκοιλιότητας είναι σημαντικό να συμβουλευθείτε τον γιατρό για να αποκλείσετε το ενδεχόμενο ύπαρξης άλλων παθήσεων.

Το μικροκλύσμα είναι μίας χρήσης, για τον λόγο αυτό δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ξανά αν έχετε χρησιμοποιήσει τη μισή δόση, όπως στην περίπτωση των βρεφών.

Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, μακριά από πηγές θερμότητας και να προστατεύεται από το φως. Να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά. Η ημερομηνία λήξης αναφέρεται σε προϊόν ακέραιο και σωστά διατηρημένο.

## ΣΥΝΘΕΣΗ

### Λειτουργικές ουσίες 73.2%

**Promelaxin**, ενεργό σύμπλοκο από μέλι και πολυσακχαρίδια αλόης και μολόχας

Τιτλοδοτημένο σε: μονοσακχαρίδια  $\geq 50\%$ , πολυσακχαρίδια (Μοριακό Βάρος  $>20.000$  Dalton)  $\geq 0,3\%$

Επιπλέον περιέχει: υδρογλυκερικό μίγμα, χυμό λεμονιού, αιθέριο έλαιο λεβάντας.

## ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

- **Ενήλικες και έφηβοι από 12 ετών: 1 μικροκλύσμα των 10 g** όποτε κρίνεται αναγκαίο. Σε περίπτωση επίμονης δυσκοιλιότητας, χρησιμοποιήστε 2 δόσεις διαδοχικά.
- **Παιδιά από 3 έως 12 ετών: 1 μικροκλύσμα των 5 g** όποτε κρίνεται αναγκαίο. Σε περίπτωση επίμονης δυσκοιλιότητας, χρησιμοποιήστε 2 δόσεις διαδοχικά.
- **Παιδιά από 1 έως 3 ετών: 1 μικροκλύσμα των 5 g** όποτε κρίνεται αναγκαίο.
- **Βρέφη από 0 έως 1 έτος: μισό μικροκλύσμα των 5 g** όποτε κρίνεται αναγκαίο.

Για να διευκολύνετε την εφαρμογή του μικροκλύσματος, γυρίστε το μωρό στην αριστερή πλευρά του με τα γόνατα διπλωμένα προς την κοιλιά.

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ

Leviacelis Adult: 6 μικροκλύσματα μίας χρήσης με πώμα ασφαλείας για ενήλικες και εφήβους των 10 g το καθένα.

Leviacelis Pediatric: 6 μικροκλύσματα μίας χρήσης με πώμα ασφαλείας για παιδιά και βρέφη των 5 g το καθένα.

## ΛΗΞΗ

Δείτε τη λήξη που αναγράφεται στη συσκευασία. Να μη χρησιμοποιείται μετά την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης.

Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης: 09/2020



## ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ

Η Aboca είναι μία Benefit Corporation και είναι πιστοποιημένη B Corp.

**Μαζί μας συμβάλλεις σε ένα βιώσιμο μέλλον.** Ανακάλυψε τη δέσμευσή μας στο [www.aboca.com](http://www.aboca.com)

Η σύνθεση του Leviacelis είναι 100% βιοδιασπώμενη και δεν περιέχει συνθετικές, ημισυνθετικές ή γενετικά τροποποιημένες ουσίες.



### ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Κουτί	PAP 21	>	Χαρτόνι
Φύλλο οδηγίων	PAP 22	>	Χαρτί
Φακελάκι	PP 5	>	Πλαστικό
Πούαρ και ρύγχος	LDPE 4	>	Πλαστικό
Πώμα ασφαλείας	LDPE 4	>	Πλαστικό

Για την απόρριψη ελέγξτε τους κανονισμούς στην περιοχή όπου διαμένετε.



[www.leviacelis.gr](http://www.leviacelis.gr)



**Aboca S.p.A. Società Agricola** - Località Aboca, 20  
52037 Sansepolcro (AR) - Italia - [www.aboca.com](http://www.aboca.com)

Εταιρεία με πιστοποιημένα συστήματα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 και ISO 13485 και περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001.

Certified



Corporation

# Leviacis



ACTIVE COMPLEX  
OF HONEYS AND  
POLYSACCHARIDES FROM  
ALOE VERA AND MALLOW

Exclusive  
**Easy  
Use**  
squeeze bottle  
+ easy application

MICRO-ENEMA WITH PROMELAXIN

EU PATENT GRANTED

EP2919857B1

**Double Action**

**Promotes bowel movement without irritation,  
protecting the rectal mucosa**

gluten  
free

Suitable for coeliacs

MEDICAL DEVICE Class IIb

**EN** Leviacis is an innovative **micro-enema produced with honey**, which combines a balanced evacuative action with a protective and soothing action on the rectal mucosa, to help relieve the discomfort, irritation and inflammation caused by constipation.

The **double action of Leviacis** is achieved thanks to **PROMELAXIN**, an active complex of nectar and honeydew honeys carefully selected and processed based on their monosaccharide, polysaccharide and melanoidin content and enriched with the **polysaccharide fraction** of Aloe Vera and Mallow.

#### INDICATIONS

**Leviacis** is indicated in the treatment of constipation, even when accompanied by visceral hypersensitivity (e.g. irritable bowel), fissures or haemorrhoids.

The product is also suitable for use during pregnancy, breastfeeding and in infants.


#### HOW IT WORKS

The non-irritating evacuative action of **Leviacis** generates a balanced, physiological stimulus to produce defecation. Furthermore, thanks to its viscosity and mucus-like properties, **Leviacis** also protects the rectal mucosa during defecation, imitating the lubricating action of the physiological mucus.


These particular properties, combined with its antioxidant action, enable the product to protect and soothe the mucosa through an indirect anti-inflammatory action derived from the physical characteristics of the product.

#### INSTRUCTIONS FOR USE

1) Open the micro-enema by removing the safety cover:

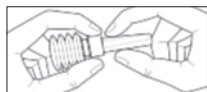

- Hold the ring above the squeeze bottle
- Using your other hand, bend the cannula cover until it breaks free from the ring

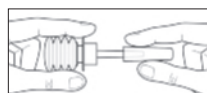

- Remove the cannula cover

2) Apply several drops of the product in the perianal area and gently insert the cannula into the rectum.

3) Fully depress the micro-enema; after application, keep it depressed until the cannula is completely removed to avoid drawing the product back.

#### WARNINGS

Do not use in case of individual hypersensitivity or allergy to one or more components. If constipation persists, see a doctor in order to exclude other medical conditions.

The micro-enema is disposable and should not be reused, even when half-doses are administered; for example, in infant use.

Store at room temperature, away from heat sources and protected from light. Keep out of reach of children. The expiry date refers to the intact product, stored correctly.

#### COMPOSITION

**Functional substances 73.2%**

**Promelaxin**, active complex of honeys and Aloe Vera and Mallow polysaccharides

*Titrated in: monosaccharides ≥ 50%, polysaccharides (molecular weight > 20,000 daltons) ≥ 0.3%.*

Also contains: hydroglycerin mixture, Lemon juice, essential oil of Lavender.

#### DOSAGE

- **Adults and children over 12 years: 1 x 10 g micro-enema** as needed. In cases of obstinate constipation, apply 2 consecutive doses.
- **Children from 3-12 years: 1 x 5 g micro-enema** as needed. In cases of obstinate constipation, apply 2 consecutive doses.
- **Children from 1-3 years: 1 x 5 g micro-enema** as needed.
- **Infants from 0-1 years: half a 5 g micro-enema** as needed.

To facilitate micro-enema application, position the child on his left side with his knees tucked into the stomach.

#### PACK FOR SALE

Leviacis Adult: 6 x 10 g disposable micro-enemas with cannula cover for adults and adolescents

Leviacis Pediatric: 6 x 5 g disposable micro-enemas with cannula cover for children and infants

#### EXPIRY DATE

See the expiry date stated on the pack. Do not use beyond the expiry date indicated.

**Last revision date:** 09/2020



#### FOR TODAY AND TOMORROW'S HEALTH

Aboca is a Benefit Corporation and certified B Corp. **With us, you contribute to a sustainable future.** Learn more about our commitment at [www.aboca.com](http://www.aboca.com)

The Leviacis formulation is 100% biodegradable and contains no synthetic, semi-synthetic or genetically modified substances.



#### PACKAGING MATERIALS

Carton box	PAP 21	>	Paperboard
Leaflet	PAP 22	>	Paper
Sachet	PP 5	>	Plastic
Squeeze bottle and Cannula	LDPE 4	>	Plastic
Cannula cover	LDPE 4	>	Plastic

For disposal, please check the regulations  
in your local area.



[www.leviacis.gr](http://www.leviacis.gr)



**Aboca S.p.A. Società Agricola** - Località Aboca, 20  
52037 Sansepolcro (AR) - Italia - [www.aboca.com](http://www.aboca.com)

Company operating under certifications ISO 9001 and ISO 13485 for quality management systems and ISO 14001 for environmental management systems.

