


Oroben

- Afte • Gingivite • Mici leziuni
- Igienă orală zilnică

Reduce durerea, protejează
și favorizează vindecarea

APĂ DE GURĂ

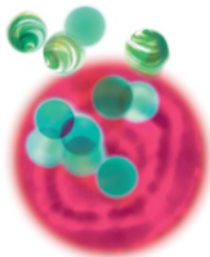

cu Resinox^{FP}[®]
complex molecular natural
din polizaharide, rășini și flavonoide

100%
natural

gluten
free



CU INGREDIENTE
OBTINUTE
DIN AGRICULTURA
ECOLOGICĂ

DISPOZITIV MEDICAL Clasa IIa

Oroben Apă de gură este un dispozitiv medical care reduce durerea și favorizează vindecarea aftelor, a stomatitelor aftoase recurente, a gingivitelor inflamate și a micilor leziuni de la nivelul gurii, cauzate, de exemplu, de tratamente dentare sau de utilizarea aparatelor ortodontice și a protezelor dentare.

CUM ACȚIONEAZĂ

Oroben apă de gură acționează datorită complexului molecular natural **Resinox FP**, rezultat al cercetării Aboca, alcătuit din polizaharide, rășini și flavonoide, care creează pe mucoasă o barieră activă cu acțiune dublă:

1. PROTECTIV-HIDRATANTĂ

Formează o peliculă adezivă pe leziune sau pe zona inflamată, care limitează contactul cu agenții externi, patogeni sau iritanți ce combat procesul natural de vindecare și regenerare tisulară.

2. ANTIOXIDANTĂ

Protejează mucoasa împotriva acțiunii iritante a radicalilor liberi.

Datorită acestor mecanisme, produsul desfășoară **o acțiune antiinflamatoare indirectă** și favorizează regenerarea tisulară, reducând durata de vindecare.

În plus, uleiul esențial de mentă are o acțiune răcoritoare, lăsând o senzație plăcută de prospețime în gură, fiind util și pentru reducerea halenei care însoțește adeseori gingivitele.

Oroben Apă de gură ajunge în fiecare parte a cavității bucale prin clătiri și gargare, permite eliminarea agenților iritanți și favorizează controlul micromediului, igiena și protecția gurii.

INDICAȚII

Adjuvant specific pentru tratamentul aftelor, al stomatitelor aftoase recurente și al gingiilor inflamate. Poate fi utilizat și pentru mici leziuni la nivelul gurii, cauzate, de exemplu, de tratamente dentare sau de folosirea unor aparate ortodontice sau proteze dentare. În cazul unor sensibilități deosebite, poate fi utilizat ca protecție preventivă a mucoasei orale și pe o perioadă îndelungată. Potrivit și pentru copii peste 6 ani. Inofensiv dacă este înghițit accidental în timpul aplicării.

Concentrația ridicată de substanțe funcționale poate determina o mică depunere pe fundul flaconului; este suficientă o ușoară agitare pentru a obține o dispersie omogenă.

MOD DE UTILIZARE

Agitați flaconul înainte de utilizare. Se recomandă să utilizați aproximativ 10 ml de apă de gură cu ajutorul măsurii dozatoare specifice, de 2 sau de 3 ori pe zi, efectuând clătiri și gargare timp de cel puțin un minut. Produsul poate fi utilizat în stare pură sau diluat cu puțină apă.

În cazul utilizării de către copii, se recomandă produsul diluat.

Evitați să consumați băuturi sau alimente cel puțin 15 minute după aplicare, pentru a favoriza aderența pe mucoasă. După utilizare, închideți bine flaconul și spălați cu atenție măsura dozatoare.

COMPOZIȚIE

Substanțe funcționale: Resinox FP, complex molecular natural din polizaharide (din Aloe vera*), flavonoide (din Mușețel*) și rășini (din Smirnă).

Conține, de asemenea: Soluție hidroalcoolică; Glicerină vegetală; Alcool etilic din grâu organic*, Ulei esențial din Mentă; Arome naturale; Extract de Lemn dulce*; Gumă xantan.

**Ingrediente din Agricultură Ecologică*

Nu conține conservanți.

AVERTIZĂRI

A nu se utiliza în caz de hipersensibilitate sau alergie individuală la una sau mai multe componente ale produsului.

A se păstra într-un loc răcoros, uscat și ferit de surse de lumină și căldură. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. Data expirării se referă la produsul păstrat în ambalajul original și în condiții corespunzătoare.

Dacă simptomul persistă, consultați medicul pentru a înlătura eventualele cauze sistemice sau de natură dentară, care necesită alte tipuri de tratament.

DATA DE EXPIRARE

A se vedea data expirării înscrisă pe ambalaj. A nu se utiliza după data expirării indicată. Vă recomandăm să utilizați produsul în termen de 6 luni de la deschidere.

AMBALAJ: flacon din sticlă de 150 ml.

Conține o măsură dozatoare  0373

Hidrați 150 ml - Anhidri 30 ml

Lic. UTF IT00PG - A00035A - Alcool 20% vol.

Completează gama Oroben Gel oral.

DATA ULTIMEI REVIZUIRI: 11/2018

AFTE, GINGIVITE ȘI MICI LEZIUNI

Mucoasa orală și gingiile pot suferi stări inflamatorii acute, adeseori recurente sau cronice cum ar fi stomatite, gingivite și mici leziuni.

Stomatita aftoasă, mai des întâlnită sub denumirea de aftă, este o leziune ulcerativă localizată și de dimensiuni variabile care afectează unul sau mai multe puncte ale mucoasei din interiorul cavității bucale. Astfel de leziuni sunt de obicei autolimitatoare, adică tind să se vindece spontan în decurs de una sau două săptămâni; totuși, în general, acestea recidivează și sunt foarte dureroase, de natură să cauzeze dificultăți la mâncare, băut sau vorbit.

Unele stări inflamatorii mai des întâlnite pot afecta însă gingiile și pot fi cauzate de o igienă dentară incorectă (acumulare de tartru sau utilizare greșită a periuței de dinți și a aței dentare), de tratamente dentare sau de folosirea unor aparate sau proteze care pot cauza uneori mici leziuni ce afectează gingiile sau alte zone ale mucoasei din interiorul cavității bucale.



 0477

 **Aboca S.p.A. Società Agricola**

Loc. Aboca, 20 - 52037 Sansepolcro (AR) - Italia - www.aboca.com

Societate cu sistem de management al calității ISO 9001 și ISO 13485

și cu sistem de management de mediu certificat ISO 14001.