

# Melilax

MICROCLISTER COM PROMELAXIN

FÓRMULA PATENTEADA



COMPLEXO ATIVO  
DE MÉIS E  
POLISSACÁRIDOS  
DE ALOÉ E MALVA

Fole exclusivo  
**Easy Use**  
+ fácil de aplicar

**Dupla Ação**  
**Liberta o intestino sem irritar,**  
**protegendo a mucosa retal**

gluten  
free

DISPOSITIVO MÉDICO  
Classe IIb

**Melilax** é um **microclister inovador à base de mel**, que combina uma equilibrada ação evacuante com uma ação protetora e lenitiva da mucosa retal, útil para combater a sensação de incômodo, a irritação e a inflamação presentes em caso de obstipação.

A **dupla ação de Melilax** é obtida graças a **PROMELAXIN**, um complexo ativo de méis de néctar e de melada especificamente selecionados e tratados com base no seu conteúdo de monossacáridos, polissacáridos e melanoidinas, enriquecido com a **fração polissacárida** de Aloé e Malva.

## COMO ATUA

**Melilax** exerce uma ação evacuante não irritante e, como tal, induz um estímulo fisiológico e equilibrado de ativação da defecação.

Além disso, **Melilax**, graças às suas propriedades semelhantes ao muco e à sua viscosidade, protege a mucosa retal durante a passagem das fezes, imitando a ação lubrificante do muco fisiológico.

Estas propriedades especiais, juntamente com a ação antioxidante, conferem ao produto a capacidade de proteger e aliviar a mucosa, realizando uma ação anti-inflamatória indireta graças às características físicas do produto.

## INDICAÇÕES

**Melilax** é indicado no tratamento da obstipação, mesmo na presença de hipersensibilidade visceral (como no caso do cólon irritável), fissuras anais e hemorroidas.

O produto também é adequado para o uso durante a gravidez, amamentação e em lactentes.

## COMPOSIÇÃO

**Substâncias funcionais 73,2%**


**Promelaxin** complexo ativo de méis e polissacáridos de Aloé e Malva

*Título em: monossacáridos ≥ 50%, polissacáridos (Peso Molecular >20.000 Dalton) ≥ 0,3%*


Contém também: mistura hidroglicérica, sumo de Limão, óleo essencial de Lavanda.

## MODO DE USO

1) Abrir o microclister removendo o cobre-cânula de segurança:

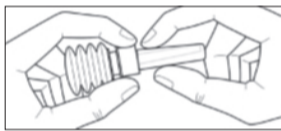

- Segurar no anel branco por cima do fole
- Com a outra mão, dobrar o cobre-cânula até que parta e se separe completamente do anel

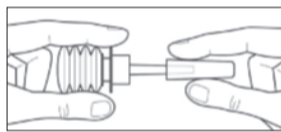

- Retirar o cobre-cânula

2) Aplicar algumas gotas de produto na zona perianal e introduzir delicadamente a cânula no reto.

3) Pressionar a fundo o microclister e, no final da aplicação, mantê-lo pressionado até à extração completa da cânula, para evitar que o produto seja reaspirado.

**FÓRMULA PATENTEADA**

Patente n.º  
102012902100704

gluten free

Adequado a pessoas com doença celíaca

## MELILAX ADULT



Embalagem de 6 microclisters de utilização única com cobre-cânula para adultos e jovens de 10 g cada.

**Indicado para adultos e jovens a partir de 12 anos de idade. Adequado também durante a gravidez e amamentação.**

### POSOLOGIA

**1 microclister de 10 g conforme a necessidade. Em caso de obstipação intensa, aplicar 2 doses consecutivamente.**

## MELILAX PEDIATRIC



Embalagem de 6 microclisteres de utilização única com cobre-cânula para crianças e lactentes de 5 g cada.

### Indicado para crianças e lactentes.

Para facilitar a aplicação do microclister, é preferível posicionar a criança deitada sobre o lado esquerdo com os joelhos dobrados junto à barriga.



### POSOLOGIA

*Crianças entre 3 e 12 anos:*

**1 microclister de 5 g** conforme a necessidade.

Em caso de obstipação intensa, aplicar 2 doses consecutivamente.

*Crianças entre 1 e 3 anos:*

**1 microclister de 5 g** conforme a necessidade.

*Lactentes entre 0 e 1 ano:*

**meio microclister de 5 g** conforme a necessidade.

### ADVERTÊNCIAS

Não utilizar se existir hipersensibilidade ou alergia individual em relação a um ou mais componentes. Em caso de obstipação persistente, é importante consultar o médico para excluir outras patologias. O microclister é de utilização única, pelo que não deve ser reutilizado caso seja administrada meia dose, como no caso dos lactentes.

Conservar à temperatura ambiente, afastado de fontes de calor e ao abrigo da luz.

Manter fora do alcance das crianças. A data de validade refere-se ao produto íntegro e corretamente conservado.

### VALIDADE

Ver data de validade na embalagem. Não utilizar após a data de validade indicada.

### EMBALAGEM DE VENDA

**Melilax Adult:** 6 microclisteres de utilização única com cobre-cânula para adultos e jovens de 10 g cada

**Melilax Pediatric:** 6 microclisteres de utilização única com cobre-cânula para crianças e lactentes de 5 g cada

### A OBSTIPAÇÃO

O termo “obstipação” é utilizado para indicar essencialmente um aumento do tempo de permanência das fezes na última parte do intestino. Nesta condição, existe uma acumulação de material fecal seco e duro devido a uma excessiva reabsorção dos líquidos: as fezes têm pouco volume, são expulsas de **forma pouco frequente** (até menos de 3 evacuações por semana) e com **dificuldade e/ou dor** (devido às fezes duras).

Em alguns casos, a obstipação pode manifestar-se também com uma sensação de evacuação incompleta, apesar da frequência normal, ou com a necessidade de grande esforço para evacuar.

### AS CAUSAS

As principais causas na origem do problema, em qualquer faixa etária, podem ser um **estilo de vida incorreto** (alimentação não equilibrada, insuficiente consumo de água, verduras e fruta, pouca atividade física e vida sedentária), **alterações dos hábitos pessoais ou das condições climáticas** (como, por exemplo, no caso das viagens), **uso de alguns fármacos, presença de doenças gastrointestinais ou metabólicas** (como a síndrome do intestino irritável), ou **condições especiais como stress, imobilidade-acamação (sobretudo nos idosos)**.

**Hemorroidas, fissuras anais e prolapso** podem causar obstipação ou podem ser uma sua consequência. A dificuldade de evacuação e a irritação local desencadeiam um círculo vicioso que impede quer a resolução da obstipação, quer a melhoria dos problemas associados. Uma causa frequente de obstipação é o **controlo voluntário do estímulo de evacuar**, problema frequente nas crianças, sobretudo nos primeiros 2-3 anos de vida. Além disso, nas crianças, pode ocorrer também **durante estados febris prolongados** que podem provocar leves condições de desidratação.

### CONSELHOS ÚTEIS

Em muitos casos, a obstipação pode ser corrigida com uma dieta rica em água e fibras: estas ligam com a água em várias proporções e contribuem para aumentar o volume das fezes. É também útil uma atividade física regular.



[www.melilax.pt](http://www.melilax.pt)



0373

Data da última revisão: 02/2016



Aboca S.p.A. Società Agricola - Loc. Aboca, 20 - 52037 Sansepolcro (AR) - Italia  
[www.aboca.com](http://www.aboca.com)

Empresa com sistema de gestão de qualidade ISO 9001 e ISO 13485  
e sistema de gestão ambiental ISO 14001 certificados.