


Oroben

• Aftas • Gengivites
• Pequenas lesões • Higiene oral diária

Reduz a dor, protege
e favorece a cicatrização

COLUTÓRIO

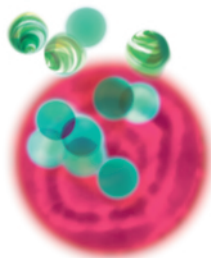

com **Resinox^{FP}**,
complexo molecular natural
de polissacáridos, resinas e flavonoides



COM INGREDIENTES
DE AGRICULTURA
BIOLÓGICA

DISPOSITIVO MÉDICO Classe IIa

Oroben Colutório oral é um dispositivo médico que reduz a dor e favorece a cicatrização de aftas, estomatites aftosas recorrentes, gengivas inflamadas e pequenas lesões da boca devido, por exemplo, a tratamentos dentários ou ao uso de aparelhos e próteses dentárias.

COMO ATUA

Oroben Colutório atua graças a **Resinox FP**, um complexo molecular natural fruto da Investigação Aboca, composto por polissacáridos, resinas e flavonoides que criam na mucosa uma barreira ativa com uma dupla ação:

1. PROTETORA-HIDRATANTE

Forma uma película adesiva sobre a lesão ou área inflamada que limita o contacto com agentes externos, patogénicos ou irritantes que contrariam o processo natural de cicatrização e regeneração dos tecidos.

2. ANTIOXIDANTE

Protege a mucosa da ação irritante dos radicais livres.

Graças a estes mecanismos, o produto exerce **uma ação anti-inflamatória indireta** e favorece a reparação dos tecidos, reduzindo o tempo de cicatrização.

Além disso, o óleo essencial de Hortelã desenvolve uma ação refrescante, deixando uma agradável sensação de frescura na boca, útil também para reduzir a halitose que muitas vezes acompanha as gengivites.

Oroben Colutório permite alcançar todas as partes da cavidade oral, através de bochechos e gargarejos, permite a remoção de agentes irritantes e favorece assim o controlo do microambiente, a higiene e a proteção da boca.

INDICAÇÕES

Coadjuvante específico para o tratamento de aftas, estomatites aftosas recorrentes e gengivas inflamadas. Pode ser usado também para pequenas lesões da boca devido, por exemplo, a tratamentos dentários ou ao uso de aparelhos e próteses dentárias. Em caso de sensibilidade especial, pode ser utilizado como proteção preventiva da mucosa oral também por períodos prolongados. Adequado também para crianças com mais de 6 anos. Inócuo se ingerido acidentalmente durante a aplicação.

Pode surgir um depósito no fundo do frasco devido à alta concentração de substâncias funcionais; é suficiente uma leve agitação para obter uma dispersão homogénea do produto.

MODO DE USO

Agitar o frasco antes de usar. Recomenda-se utilizar cerca de 10 ml de colutório com o respetivo doseador, 2 ou 3 vezes por dia, efetuando bochechos e gargarejos durante pelo menos um minuto. O produto pode ser usado puro ou diluído em pouca água.

Para a utilização nas crianças, recomenda-se o produto diluído.

Evitar a ingestão de bebidas ou alimentos pelo menos até 15 minutos depois da aplicação, de modo a favorecer a adesão à mucosa. Fechar bem o frasco após o uso e lavar cuidadosamente o doseador.

COMPOSIÇÃO

Substâncias funcionais: Resinox FP, complexo molecular natural de polissacáridos (de Aloé vera*), flavonoides (de Camomila*) e resinas (de Mirra).

Contém também: Solução hidroalcoólica; Glicerina vegetal; Álcool etílico de trigo biológico*; Óleo essencial de Hortelã-pimenta; Aromas naturais; Extrato de Alcaçuz*; Goma xantana.

**Ingrediente de Agricultura Biológica*

Não contém conservantes.

ADVERTÊNCIAS

Não utilizar se existir hipersensibilidade ou alergia individual em relação a um ou mais componentes. Conservar em local fresco, seco, afastado de fontes de calor e ao abrigo da luz. Manter fora do alcance das crianças. A data de validade refere-se ao produto íntegro e corretamente conservado. Se o sintoma persistir, consultar o médico para excluir eventuais causas sistêmicas ou de origem dentária que requerem outro tipo de tratamento.

VALIDADE

Ver a data de validade na embalagem. Não utilizar após a data de validade indicada. Recomenda-se usar o produto no prazo de 6 meses após a abertura.

EMBALAGEM: Frasco de vidro de 150 ml.

Contém doseador  0373

Hidratos 150 ml - Anidros 30 ml

Lic. UTF IT00PG - A00035A - Álcool 20% vol.

Completa a linha Orobén Gel oral.

DATA DA ÚLTIMA REVISÃO: 11/2018

AFTAS, GENGIVITES E PEQUENAS LESÕES

A mucosa oral e as gengivas podem estar sujeitas a estados inflamatórios agudos, muitas vezes recorrentes ou crónicos, como estomatites, gengivites e pequenas lesões.

A estomatite aftosa, mais conhecida por afta, é uma lesão ulcerativa localizada e de tamanho variável que envolve um ou mais pontos da mucosa dentro da cavidade oral. Estas lesões são normalmente autolimitadas, ou seja, tendem a cicatrizar espontaneamente dentro de uma ou duas semanas, contudo, são geralmente recorrentes e muito dolorosas, criando dificuldades em comer, beber ou falar. No entanto, estados inflamatórios mais comuns podem envolver as gengivas e ser o resultado de uma má higiene oral (acumulação de placa ou utilização incorreta da escova de dentes e do fio dental), de tratamentos dentários ou do uso de aparelhos ou próteses dentárias, cuja utilização pode por vezes causar até pequenas lesões que afetam as gengivas ou outros pontos da mucosa dentro da cavidade oral.



 0477



Aboca S.p.A. Società Agricola

Loc. Aboca, 20 - 52037 Sansepolcro (AR) - Italia - www.aboca.com

Empresa com sistema de gestão de qualidade ISO 9001 e ISO 13485 e sistema de gestão ambiental ISO 14001 certificados.