

# Fitonasal

Nebulizzatore

IT

Lava, decongestiona e protegge  
la mucosa nasale

DISPOSITIVO MEDICO NATURALE  
AD AZIONE FISIOLGICA

Senza conservanti

SOLUZIONE IPERTONICA BILANCIATA E STANDARDIZZATA



PER ADULTI  
E BAMBINI  
DAI 6 ANNI DI ETÀ

DISPOSITIVO MEDICO Classe IIa

100%  
naturale

senza  
glutine  
gluten  
free

600  
mOsm/kg

CE 0477



Con Tannisal-FL

Complesso molecolare naturale  
di Tannini, Flavonoidi e Salgemma

## SPRAY NEBULIZZATORE

**Fitonasal Nebulizzatore** è un dispositivo medico naturale che **libera il naso da polveri, pollini e altri allergeni, fluidifica il muco, decongestiona e protegge la mucosa nasale con azione fisiologica.**

**Fitonasal Nebulizzatore** agisce grazie a:

- 1. TANNISAL-FL**, complesso molecolare naturale composto da Tannini, Flavonoidi e Salgemma che, insieme alla glicerina vegetale, ha un'azione:
  - **astringente locale** che si esplica tramite l'interazione aspecifica tra il prodotto e le proteine, tra le quali la proteina infiammatoria bradichinina presente nei fluidi nasali, permettendone la rimozione;
  - **osmotica** che favorisce il richiamo di acqua dalla mucosa nasale congestionata, senza causare irritazione e secchezza grazie all'**osmolalità bilanciata e standardizzata** (600 mOsm/Kg);
  - **protettiva** grazie all'azione muco-adesiva e antiossidante che favorisce il mantenimento dell'integrità della barriera epiteliale.
- 2. getto nebulizzato a flusso continuo** che consente una pulizia profonda delle cavità nasali e permette la rimozione del muco in eccesso e degli agenti patogeni, irritanti ed allergizzanti in esso intrappolati (virus, batteri, fumo, smog, pollini, etc.).

Gli aromi naturali di Eucalipto e Menta donano una piacevole sensazione di **freschezza.**

**Fitonasal Nebulizzatore** può essere utilizzato frequentemente e per periodi prolungati perché non contiene decongestionanti vasocostrittori, non dà assuefazione, non irrita e non secca la mucosa.

## CONFEZIONE

**Fitonasal Nebulizzatore** si presenta in un contenitore ad erogazione spray dotato di tecnologia "bag on valve" (BOV) che contribuisce all'efficacia del prodotto e offre molteplici vantaggi:

- **Praticità** - la tecnologia BOV consente un'**erogazione a flusso continuo** e in **tutte le posizioni**;
- **Ergonomicità** - il beccuccio erogante è stato pensato per rispettare anche le narici più delicate;
- **Qualità** - il prodotto è contenuto in un sacchetto isolato dall'esterno, così da consentirne l'uscita ma non il rientro di aria, liquidi o altri residui;
- **Tutela dell'ambiente** - contiene gas propellente (Azoto) che rispetta lo strato di Ozono.

## INDICAZIONI

**Fitonasal Nebulizzatore** è indicato per la prevenzione e il trattamento, sia acuto che cronico, delle irritazioni, della congestione nasale e del prurito dovuti a:

- Allergie
- Inquinamento e/o aria condizionata
- Raffreddore e sindromi influenzali
- Rinosinusiti
- Cause meccanico-ostruttive (es. deviazioni del setto nasale).

**Fitonasal Nebulizzatore**, inoltre, può essere usato come trattamento coadiuvante in caso di tosse e mal di gola causati da scolo retronasale.

Il prodotto può essere utilizzato a partire dai 6 anni di età.

Durante gli episodi acuti il prodotto può essere associato a Fitonasal Spray concentrato.

**Fitonasal Nebulizzatore** può essere utilizzato anche in caso di trattamenti farmacologici (se farmaci ad applicazione nasale si consiglia di distanziare di almeno 1 ora l'applicazione dei due prodotti).



Dopo l'uso, si consiglia di applicare Fitonasal Biopomata con Redraphen per rinforzare l'azione di protezione della mucosa nasale.

## MODO D'USO

Effettuare una erogazione per narice almeno **2 volte al giorno**, mattina e sera e ogni qualvolta lo si ritiene necessario.

Si consiglia di applicare il prodotto anche alla sera prima di coricarsi per una igiene profonda delle cavità nasali che favorisce la respirazione durante il riposo notturno.

Inclinare la testa di lato, inserire l'erogatore nella narice rivolta verso l'alto ed esercitare una leggera pressione per alcuni secondi. Ripetere l'operazione con l'altra narice. Lasciare che il prodotto si diffonda nelle cavità nasali. Soffiare il naso.

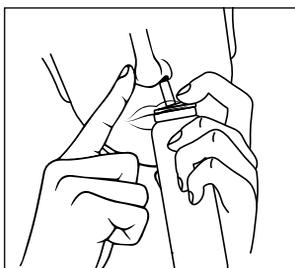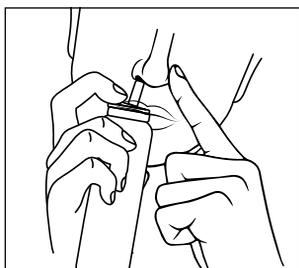

Dopo ciascun utilizzo pulire l'erogatore con un panno umido e pulito e asciugare con cura.

## COMPOSIZIONE

**TANNISAL-FL:** complesso molecolare naturale standardizzato composto da frazione tanninica e frazione flavonoidica (da Amamelide e Timo), Salgemma (sale di estrazione mineraria non trattato chimicamente).

Acqua, Glicerina vegetale, Aroma naturale di Eucalipto e Aroma naturale di Menta.

**Fitonasal Nebulizzatore è un dispositivo medico naturale e biodegradabile al 100%, non contiene sostanze di sintesi, semisintesi o geneticamente modificate.**

## AVVERTENZE

Non utilizzare se presente ipersensibilità o allergia individuale verso uno o più componenti. Utilizzare esclusivamente per via nasale. Evitare il contatto con gli occhi, nel caso lavarli con acqua. Se i sintomi persistono consultare il medico.

**Attenzione** - Contenitore pressurizzato: può scoppiare se riscaldato. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Proteggere dai raggi solari. **Non esporre a temperature superiori a 50° C/122 °F.** Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Conservare a temperatura ambiente in luogo fresco, asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. La data di scadenza riferisce al prodotto integro e correttamente conservato.

## SCADENZA

Vedere la scadenza riportata sulla confezione. Non utilizzare dopo la data di scadenza indicata. La data di scadenza indicata sulla confezione resta invariata anche dopo la prima erogazione.

**CONFEZIONE VENDITA:** Spray nebulizzatore da 125 ml

**DATA ULTIMA REVISIONE:** Novembre 2020



**Aboca S.p.A. Società Agricola**

Loc. Aboca, 20 - 52037 Sansepolcro (AR) - Italia - [www.aboca.com](http://www.aboca.com)

Azienda con sistema di gestione qualità ISO 9001 e ISO 13485  
e sistema di gestione ambientale ISO 14001 certificati.