

# Golamir

TRATTAMENTO DEL MAL DI GOLA

Riduce il dolore  
e protegge la mucosa

Con ActiFilmDOL  
Complesso vegetale

DISPOSITIVO MEDICO  
Regolamento (UE) 2017/745

SPRAY NO ALCOL

ADULTI  
E BAMBINI  
1+ ANNI

100%  
FORMULA NATURALE  
BIODEGRADABILE

senza  
glutine



**Golamir** è un dispositivo medico che **agisce su dolore, bruciore e difficoltà di deglutizione proteggendo la mucosa orofaringea** dai fattori scatenanti l'irritazione (virus, batteri, allergeni, fumo, smog, polvere). **Allevia**, infatti, in modo fisiologico **il dolore e protegge la gola** attraverso un'**azione antinfiammatoria indiretta** come risultato dei seguenti meccanismi d'azione:



**Barriera**

**Antiossidante**

- **Barriera**

Forma un film attivo sulla mucosa per ridurre l'ipersensibilità e proteggerla dagli attacchi degli agenti esterni.

- **Antiossidante**

Riduce i radicali liberi generati dall'infiammazione della mucosa.

Crea, inoltre, un **ambiente sfavorevole alla crescita dei batteri**.

Gusto gradevole di Frutti di bosco e Mora.

**Golamir, grazie alla sua composizione e al suo meccanismo di azione fisiologico, riduce il dolore e protegge la gola nel rispetto dell'organismo e dell'ambiente.**

## INDICAZIONI

**Golamir** è indicato nei casi di mal di gola per il **trattamento degli stati irritativi e infiammatori del cavo orofaringeo**, che possono essere causati da virus, batteri, allergeni o dal contatto con agenti esterni irritanti (fumo, smog, polvere). Il prodotto è adatto anche negli stati di raffreddamento dove le secrezioni nasali, scendendo nella gola, possono essere causa di irritazione.

**Da 1 anno di età.**

**Golamir**, per il suo meccanismo d'azione, può essere utilizzato anche in associazione ai trattamenti farmacologici prescritti dal medico.

## MODO D'USO

Agitare il flacone prima dell'uso. Si consiglia di somministrare nel cavo orofaringeo:

**1-6 anni:** 4 nebulizzazioni fino a 4 volte al giorno.

**Sopra 6 anni e adulti:** 4 nebulizzazioni fino a 8 volte al giorno.

Nei bambini più piccoli il prodotto può essere erogato ai lati interni delle guance in modo da favorirne gradualmente l'assunzione.

L'astuccio contiene l'erogatore in bustina sigillata. Al primo utilizzo eliminare il tappo in alluminio sul flacone ed inserire l'erogatore.

**Golamir** può essere assunto anche per periodi prolungati. Se i sintomi persistono consultare, comunque, il medico o il farmacista.

## COMPOSIZIONE

**Golamir** è un prodotto **100% naturale e biodegradabile**, con ActiFilm DOL, complesso vegetale. Non contiene sostanze di sintesi, semisintesi chimica o geneticamente modificate e anche i processi di lavorazione con cui è ottenuto non utilizzano né solventi né altre sostanze di sintesi chimica.

1 ml di prodotto contiene: complesso vegetale **ActiFilm DOL** 25 mg, a base di **Tannini, Flavonoidi, Resine e Polisaccaridi** (frazione estrattiva LPME di Agrimonia; frazione estrattiva di Mirra; gel fogliare disidratato di Aloe vera); Glicerina vegetale; Acqua; Succo di limone; Gomma xanthan; Succo di mela; Aromi naturali di Frutti di bosco e Mora.

Non contiene conservanti e edulcoranti artificiali.

Un'erogazione corrisponde a circa 0,17 ml.

**La ricerca Aboca ha messo a punto un esclusivo processo tecnologico estrattivo, chiamato LPME (Liquid-Phase Microextraction), che partendo da sostanze naturali consente di ottenere frazioni estrattive complesse, concentrate e validate.**

**Golamir** è controllato secondo i seguenti tre parametri grazie ai quali Aboca garantisce la qualità dei prodotti naturali nella loro complessità.

**1. Impronta digitale metabolomica tramite tecnologia NIR (near infrared spectroscopy)**

*a conferma della validazione del processo produttivo del prodotto naturale*

**2. Test di adesione**

*a conferma dell'azione barriera e protettiva sulle cellule della faringe*

**3. Titolo in tannini ≥ 0,05%**

## AVVERTENZE E PRECAUZIONI D'USO

Non utilizzare se presente ipersensibilità o allergia individuale verso uno o più componenti.

## EFFETTI INDESIDERATI

**Golamir**, in genere, è ben tollerato. Tuttavia, se si nota la comparsa di un effetto indesiderato riconducibile al prodotto o al suo utilizzo, informare il medico e/o il farmacista e il Fabbricante Aboca ai contatti riportati su questo foglietto illustrativo. In caso di incidente grave informare anche l'autorità competente del proprio Paese.

## SOVRADOSAGGIO

Nella popolazione generale, in funzione dei dati disponibili, non sono noti né attesi fenomeni dovuti al sovradosaggio.

## INTERAZIONI CON ALTRI DISPOSITIVI MEDICI, MEDICINALI O ALIMENTI

Dai dati disponibili non sono attese interazioni di **Golamir** con altri dispositivi medici, medicinali o alimenti.

## CONSERVAZIONE E SCADENZA

Conservare a temperatura ambiente, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Tenere fuori dalla portata dei bambini. La data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato. Vedere la data di scadenza riportata sulla confezione. Non utilizzare dopo la data di scadenza indicata. Si raccomanda di conservare l'astuccio.

## CONFEZIONE VENDITA

Flacone in vetro da 30 ml con nebulizzatore spray.

**DATA ULTIMA REVISIONE:** Novembre 2023

# Aboca

## PER LA SALUTE DI OGGI E DI DOMANI

Da oltre 40 anni noi di Aboca ricerchiamo nella Natura le risposte per la salute delle persone, nel rispetto dell'organismo e dell'ambiente.

## LA RICERCA ABOCA

Riconosciamo il potenziale terapeutico delle sostanze naturali complesse e le proiettiamo dal mondo della tradizione a quello dell'innovazione, secondo i criteri della Evidence Based Medicine e della Systems Medicine.


## 100% NATURALE: DALLA COLTIVAZIONE AL PRODOTTO FINITO

Realizziamo i nostri prodotti grazie ad un sistema verticalizzato che va dalla coltivazione biologica, alla ricerca scientifica fino alla produzione, escludendo l'utilizzo di sostanze di sintesi chimica e non biodegradabili lungo tutto il processo.

## LA SALUTE SOSTENIBILE

La salute non è solo un bene individuale, ma anche un Bene Comune. Per questo non può esistere una vera salute senza sostenibilità. Siamo una società Benefit e con il nostro lavoro ci impegniamo formalmente a portare un beneficio per la comunità e l'ambiente.

Per conoscere tutti i nostri prodotti, visita il sito [www.aboca.com](http://www.aboca.com)

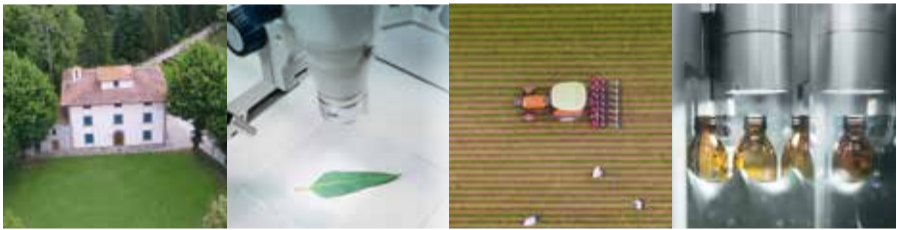

DISPOSITIVO MEDICO Classe IIa  0477

 **Aboca S.p.A. Società Agricola**

Località Aboca, 20 - 52037 Sansepolcro (AR) - Italia

[www.aboca.com](http://www.aboca.com)

Azienda con sistema di gestione qualità ISO 9001 e ISO 13485 e sistema di gestione ambientale ISO 14001 certificati.



LEA\_GOMI-A