

## Ublažava bol i štiti sluznicu

Sadrži

ActiFilm DOL

Biljni kompleks

MEDICINSKI PROIZVOD  
Uredba (EU) 2017/745100%  
PRIRODNA  
I BIORAZGRADIVA  
FORMULA

gluten free



### BEZALKOHOLNI SPREJ

**HR** Golamir je medicinski proizvod koji **djeluje na bol, peckanje i poteškoće pri gutanju štiteći orofaringealnu sluznicu** od elemenata koji izazivaju iritaciju. Naime, na fiziološki način **ublažava bol i štiti grlo neizravnim protuupalnim djelovanjem**, što je rezultat sljedećih mehanizama djelovanja:



#### Stvaranje zapreke

#### Antioksidativno djelovanje

#### • Stvaranje zapreke

Stvara aktivni sloj na sluznici te time smanjuje njenu preosjetljivost i štiti je od napada vanjskih tvari.

#### • Antioksidativno djelovanje

Smanjuje broj slobodnih radikala koji nastaju upalom sluznice.

Osim toga, **stvara okolinu koja je nepovoljna za rast bakterija**. Ugodan okus šumskog voća i kupine. **Golamir, zahvaljujući svom sastavu i fiziološkom mehanizmu djelovanja, ublažava bol i štiti grlo poštujući organizam i okoliš.**

### INDIKACIJE

**Liječenje nadražene i upaljene usno-ždrijelne šupljine** u slučajevima grlobolje koja može biti uzrokovana virusima, bakterijama, alergenima ili kontaktom s vanjskim nadražujućim tvarima (dim, smog, prašina). Proizvod je prikladan i kod prehlada kod kojih spuštanje nazalnog sekreta u grlo može biti uzrok iritacije.

#### Od navršene 1. godine života.

Može se koristiti i u kombinaciji s farmakološkim liječenjem koje je propisao liječnik.

### NAČIN PRIMJENE

Protresite bočicu prije uporabe. Preporuča se da u usno-ždrijelnu šupljinu:

**1–6 godina:** do 4 puta dnevno uštrcate sprej 4 puta.

**Djeca iznad 6 godina i odrasli:** do 4 puta dnevno uštrcate sprej 8 puta.

Kod manje djece proizvod se može primijeniti na unutarnju stranu obraza kako bi postupno olakšali uzimanje. U kutiji se nalazi raspršivač u zatvorenom omotu. Pri prvoj uporabi, skinite aluminijski čep s boce i stavite raspršivač. **Golamir** se može uzimati i tijekom duljeg vremenskog razdoblja. Ako simptomi potraju, konzultirajte se s liječnikom ili ljekarnikom. Ne koristiti u slučaju preosjetljivosti ili alergije na jedan ili više sastojaka. **Golamir** se obično dobro podnosi. Međutim, ako primijetite neku nuspojavu koja se može povezati s proizvodom ili njegovom uporabom, obavijestite svog liječnika i/ili ljekarnika kao i proizvođača, tvrtku Aboca, putem kontakata navedenih u ovim uputama za upotrebu. U slučaju ozbiljnog štetnog događaja, obavijestite i nadležne vlasti u svojoj zemlji. U općoj populaciji, prema dostupnim podacima, pojave uzrokovane predoziranjem nisu ni poznate ni očekivane. Prema dostupnim podacima, nema poznatih interakcija proizvoda **Golamir** s drugim medicinskim proizvodima ili hranom.

### SASTAV

**Golamir** je **100% prirodan i biorazgradiv** proizvod, s biljnim kompleksom ActiFilm DOL. Ne sadrži sintetičke, polusintetičke ili genetski modificirane tvari, a u proizvodnim procesima pomoću kojih se dobiva ne koriste se ni otapala niti druge kemijske sintetičke tvari.

1 ml proizvoda sadrži: biljni kompleks **ActiFilm DOL** 25 mg, na bazi **tanina, flavonoida, smola i polisaharida** (LPME ekstrahiranu frakciju turice; ekstrahiranu frakciju mirete; dehidrirani gel lista aloe vere); biljni glicerin; vodu; sok od limuna; ksantan gumu; sok od jabuke; prirodne arome šumskog voća i kupine.

Ne sadrži konzervante i umjetna sladila.

Jedna uštrcana doza sadrži otpriklike 0,17 ml.

**U istraživanjima tvrtke Aboca osmišljen je jedinstveni tehnološki proces ekstrakcije, koji se naziva LPME (Liquid-Phase Microextraction), koji polazeći od prirodnih tvari omogućava dobivanje složenih, koncentriranih i validiranih ekstrahiranih frakcija.**

**Golamir** se kontrolira u skladu sa sljedeća tri parametra, zahvaljujući kojima tvrtka Aboca može jamčiti kvalitetu prirodnih proizvoda u cijelosti.

#### 1. Metabolomički digitalni otisk pomoću tehnologije bliske infracrvene spektroskopije NIRs

(near infrared spectroscopy)

za potvrdu validacije procesa proizvodnje prirodnih proizvoda

#### 2. Ispitivanje prijanjanja

za potvrdu stvaranja zaštitnog sloja i zaštitnog djelovanja na stanice ždrijela

#### 3. Sadržaj tanina ≥ 0,05%

### ČUVANJE I ROK VALJANOSTI

Čuvati na sobnoj temperaturi, dalje od izvora topline i izravne svjetlosti.

Čuvati izvan dohvata djece. Rok valjanosti odnosi se na neotvoren i pravilno čuvan proizvod. Pogledajte rok valjanosti naveden na pakiranju.

Ne koristiti nakon navedenog roka valjanosti. Sačuvajte kartonsku kutiju.

### PAKIRANJE ZA PRODAJU

Staklena bočica od 30 ml s raspršivačem.

**DATUM ZADNJE REVIZIJE:** 11/2023

**MATERIJALI PAKIRANJA**  
Provjerite odredbe u vezi zbrinjavanja u vašem mjestu prebivališta.

Kutija PAP 21 > Papir


Upute PAP 22 > Papir

Bočica GL 72 > Staklo

Raspršivač C/PP 92 > Pretežno plastika

Vrećica PP 5 > Plastika

Čep C/ALU 90 > Pretežno aluminij

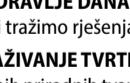

### ZA ZDRAVLJE DANAS I SUTRA

Više od 40 godina mi u tvrtki Aboca u prirodi tražimo rješenja za zdravlje ljudi, poštujući organizam i okoliš.

### ISTRAŽIVANJE TVRTKE ABOCA

Prepoznajemo terapijski potencijal kompleksnih prirodnih tvari i prenosimo ih iz svijeta tradicije u svijet inovacija, prema kriterijima medicine utemeljene na dokazima (Evidence Based Medicine) i integrativne medicine (Systems Medicine).

### 100% PRIRODAN: OD UZGOJA DO GOTOVOG PROIZVODA

Naše proizvode stvaramo vertikaliziranim sustavom koji ide od ekološkog uzgoja preko znanstvenog istraživanja do proizvodnje, isključujući upotrebu sintetičkih i biočišćenih tvari tijekom cijelog procesa.

### ODRŽIVO ZDRAVLJE

Zdravlje nije samo dobro pojedinca, već i opće dobro. Zbog toga pravo zdravlje ne može postojati bez održivosti. Aboca je društvo s odgovornim poslovanjem (Benefit Corporation), što znači, da svojim radom nastojimo pridonijeti dobrobiti zajednice i okoliša. Kako biste upoznali sve naše proizvode, posjetite stranicu [www.aboca.com](http://www.aboca.com).

Lajša bolečino  
in zaščiti sluznico

Vsebuje **ActiFilm DOL**  
Rastlinski kompleks

MEDICINSKI PRIPOMOČEK  
Uredba (EU) 2017/745

100%  
NARAVNA IN  
BIORAZGRADLJIVA  
FORMULA



PRŠILO BREZ ALKOHOLA

**SL** Golamir je medicinski pripomoček, ki **ustno in žrelno sluznico zaščiti** pred dejavniki, ki povzročajo draženje, in tako **deluje na bolečino, pekoč občutek in težave pri požiranju**. Na fiziološki način **blaži bolečino, pekoč občutek in težave pri požiranju ter grlo zaščiti s posrednim protivnetnim učinkom**, ki ga zagotavlja naslednja mehanizma delovanja:



Pregradno delovanje

Antioksidativno  
delovanje

• **Pregradno delovanje:**

Na sluznici oblikuje aktiven film, ki zmanjša njeno preobčutljivost in jo zaščiti pred snovmi iz okolja.

• **Antioksidativno delovanje:**

Zmanjša količino prostih radikalov, ki nastanejo pri vnetju sluznice.

Poleg tega ustvarja neugodno okolje za rast bakterij. Prijeten okus gozdnih sadežev in robidnic.

Golamir zaradi svoje sestave in fiziološkega mehanizma delovanja **blaži bolečino in zaščiti grlo, hkrati pa je prijazen do telesa in okolja**.

INDIKACIJE

Izdelek se uporablja za lajšanje draženja in vnetnih stanj **ustno-žrelne votline**, ki spremljajo boleče grlo in jih lahko povzročijo virusi, bakterije, alergeni ali stik z zunanjimi dražilnimi snovmi (dim, smog in prah). Izdelek je primeren tudi za prehladna obolenja, pri katerih lahko zatekanje nosnih izločkov v grlo povzroči draženje.

**Od 1. leta starosti.**

Uporablja se lahko tudi v kombinaciji s farmakološkim zdravljenjem, ki ga predpiše zdravnik.

NAČIN UPORABE

Pred uporabo stekleničko pretresite. Priporoča se, da v ustno-žrelno votljino brizgnete:

**1-6 let:** 4 razprški do 4-krat na dan.

**Otroti od 6. leta dalje in odrasli:** 4 razprški do 8-krat na dan.

Pri majhnih otrocih lahko izdelek brizgnete na notranji strani lic, da omogočite postopen vnos. Embalaža vključuje razpršilec v zaprti vrečki. Pred prvo uporabo s stekleničke odstranite aluminijast zamašek in vstavite razpršilec. **Golamir** je primeren tudi za dolgotrajno uporabo. Če simptomi ne prenehajo, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Ne uporabljajte v primeru preobčutljivosti ali alergije na eno ali več sestavin. **Golamir** uporabniki na splošno dobro prenašajo. Če kljub temu opazite neželene učinke, ki jih je mogoče pripisati izdelku ali njegovi uporabi, obvestite svojega zdravnika in/ali farmacevta ter družbo Aboca kot proizvajalko, katere kontaktni podatki so navedeni v tem navodilu. V primeru resnega zapleta obvestite tudi pristojni organ v svoji državi. Glede na razpoložljive podatke prevelik odmerek pri splošni populaciji nima znanih ali pričakovanih učinkov. Na podlagi razpoložljivih podatkov se ne pričakuje interakcija med izdelkom **Golamir** in drugimi medicinskimi pripomočki, zdravili ali živili.

SESTAVA

**Golamir** je **100-odstotno naraven** in **biorazgradljiv** izdelek z rastlinskim kompleksom ActiFilm DOL. Ne vsebuje sintetičnih, polsintetičnih ali gensko spremenjenih snovi. Proizvodni postopki, s katerimi se pridobiva, prav tako ne vključujejo uporabe topil ali drugih kemično sintetiziranih snovi.

1 ml izdelka vsebuje: rastlinski kompleks **ActiFilm DOL**, 25 mg, na osnovi **taninov, flavonoidov, smol in polisaharidov** (frakcija izvlečka LPME iz navadnega repika, frakcija izvlečka mire; gel iz dehidriranih listov aloje), rastlinski glicerin, voda, limonin sok, ksantan gumi, jabolčni sok, naravni aromi jagodičevja in robidnice.

Ne vsebuje konzervansov in umetnih sladil.

En razpršek ustreza približno 0,17 ml izdelka.

**Družba Aboca je v okviru svojih raziskav razvila ekskluzivni tehnički postopek ekstrakcije, poimenovan LPME (Liquid-Phase Microextraction oziroma mikroekstrakcija v tekoči fazi), ki omogoča pridobivanje kompleksnih, koncentriranih in preverjenih izvlečkov iz naravnih snovi.**

Družba Aboca pri preverjanju pripomočka **Golamir** upošteva spodnje tri parametre, s katerimi zagotavlja kakovost naravnih izdelkov v vsej njihovi kompleksnosti.

**1. Metabolomski prstni odtis, pridobljen s tehnologijo bližnje infrardeče spektroskopije (NIRS),**  
za potrditev validacije postopka pri proizvodnji naravnih izdelkov

**2. Preizkus adhezije**  
za potrditev pregradnega in zaščitnega delovanja na celice žrela

**3. Titracija taninov ≥ 0,05 %**

HRAMBA IN ROK UPORABNOSTI

Hranite pri sobni temperaturi, stran od virov topoteže in zaščiteno pred svetlobo. Hranite izven dosega otrok. Datum izteka roka uporabnosti velja za neodprt in pravilno shranjen izdelek. Glejte datum izteka roka uporabnosti, ki je natisnjena na embalaži. Izdelka ne uporabljajte po pretečenem roku uporabnosti. Priporoča se, da embalažo shranite.

PRODAJNO PAKIRANJE

Steklenička z razpršilcem, 30 ml

**DATUM ZADNJE POSODOBITVE:** 11/2023

**MATERIAL EMBALAŽE**  
Za informacije o odlaganju preverite lokalne predpise.

Škatla PAP 21 > Papir  
Navodilo PAP 22 > Papir  
Steklenička GL 72 > Steklo  
Razpršilec C/PP 92 > Pretežno plastika  
Vrečka PP 5 > Plastika  
Pokrovček C/ALU 90 > Pretežno aluminij

Aboca

ZA DANAŠNJE IN JUTRIŠNJE ZDRAVJE

V podjetju Aboca že več kot 40 let v naravi iščemo odgovore za zdravje ljudi, pri čemer spoštujemo telo in okolje.

RAZISKAVE PODJETJA ABOCA

Prepoznavamo terapevtski potencial kompleksnih naravnih snovi in jih iz sveta tradicije prenašamo v svet inovacij v skladu z merili medicine, ki temelji na dokazih, in sistemsko medicine.

100% NARAVNO: OD PRIDELAVE DO KONČNEGA IZDELKA

Naše izdelke proizvajamo po vertikaliziranem sistemu, ki sega od ekološke pridelave do znanstvenih raziskav in proizvodnje, pri čemer v celotnem sistemu ne uporabljamo kemično sintetiziranih in biološko nerazgradljivih snovi.

TRAJNOSTNO ZDRAVJE

Zdravje ni le dobrina posameznika, ampak tudi skupna dobrina. Zato brez trajnosti ni pravega zdravja. Aboca je družbeno odgovorno podjetje (Benefit Corporation), kar pomeni, da se zavezujemo, da bomo s svojim delom koristili skupnosti in okolju. Če želite izvedeti več o vseh naših izdelkih, obiščite [www.aboca.com](http://www.aboca.com).