

# neo Bianacid

REFLIUKSAS, RÉMUO IR VIRŠKINIMO SUTRIKIMAI  
REFLUKSS, GRÉMAS UN GREMOŠANAS TRAUČĒJUMI  
REFLUKS, KÖRVENTISED JA SEEDEHĀIRED



BE GLITIMO - BE LAKTOZĒS  
NESATUR LAKTOZI - NESATUR GLUTĒNU  
GLUTEENIVABA - LAKTOOSIVABA



## GREITAS VEIKIMAS

ESANT RÉMENIUI, JAUČIANT SKAUSMĀ,  
SUNKUMĀ IR METEORIZĀMA

## ĀTRA IEDARBĪBA

PRET GRĒMĀM, SĀPĒM, SMAGUMĀ  
SAJŪTU UN VĒDERĀ UZPŪSANĀS

## KIIRE TOIME

KÖRVENTISTE, VALU, RASKUSTUNDE  
JA PUHTUSTE VASTU

su poliprotect® augalinu un mineralinu kompleksu,  
su apsauginiu, panašu kaip gleivinēs, poveikiu  
ar poliprotect® – augu un mineralvielu kompleksu  
ar glotām līdzīgu aizsargājošu iedarbību  
taime- ja mineraalpūhise kompleksiga poliprotect®  
kaitva limatoša toimega

MEDICINOS PRIEMONĒ – Reglaments (ES) 2017/745  
MEDICĪNAS IERĪCE – Regula (ES) Nr. 2017/745  
MEDITSIINI SEADE – Määrus (EL) 2017/745

100%  
NATURAL AND  
BIODEGRADABLE FORMULA

## BURNOJE TIRPSTĀCĪS TABLETĒS - MUTĒ ŠĶĪSTĀS TABLETES - SUUS DISPERGEERUVAD TABLETID

### LV NeoBianacid su Poliprotect® sustiprina gleivi, kurios naturāliai iškloja gleivinē, apsauginj poveikj.

NeoBianacid veikia greitai, suformuodamas barjerīn plēvelē, kuri turi tokj poveikj:

- apsauginj** – dēl skrandžio ir stempļs gleivinei būdingū savybū, jis suformuoja plēvelē, kuri apsauga ir skatīna fizioloģiskais glijimo procesus;
- vietiškai rūgštingumā neutralizujantj** – vietīškai stiprina neutralizujančias skrandžio gleivin savybes, taip neleidzā rūgštimis liestis su skrandžio gleivinei ir jos pažeisti;
- antioxidačinj** – neutralizuoja laisvajū radikālu sūkeltu sudirgīmā.

Tokiu būdu gleivinē apsaugoma nuo saļyčio su skrandžio sultimis ir dirgikliais.

NeoBianacid mažina rūgštingumā jo neslopindamas, nekenkdamas skrandžio fizioloģijai ir žārmyno florai.

**INDIKĀCIJOS:** NeoBianacid rekomenduojamas vartoti esant **gastroezofaginiam refluksui** ir **skrandžio skausmui** (skausmingai dispespjai), pasireiškiančiam rūgšties refluksu, rémeni, skausmu, dirginančiu kosliu ir disfonija. NeoBianacid taip pat rekomenduojamas simptomams, susijusiems su **virškinimo sutrikimais** (neskausminga dispespjai), pavazdzīji, rūgštingumui, sunkumui ir meteorisms valpalijs, mālsinti. Šie simptomi gali būti pasikartojantis arba pasireišķi persislavgi. NeoBianacid gali padēti kaip **prevencinē priemonē** tais atvejais, kai dirginama gleivinē (pvz., vartojant vaistus nuo uždegimo ar psichinēs ir fiziņos ītampas laikotarpis). Šī produkta taip pat tinka vartoti nešūtu, zīndingo metu ir vaikams nuo 6 metu.

**NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS:** tabletē galima sučiulē burnoje arba sukrāmti, atsižvelgiant j toliau pateiktus nurodymus:

- Retkarčias pasireiškiančių simptomų atveju:** svartokite 1 tabletē, kai reikia.
- Gydant gastroezofaginālā refluksu, skausmu ir virškinimo sutrikimus:** 1 tabletē po valgio ir 1 vakare prieš einant miegoti. Be to, produkta galima vartoti pagal poreikj kelius kartus per dienā, net ir dažnai.
- Kartu su protonu sūrblīgo inhibitoriem ir H2 antagonista bei nutraukus gydymā:** vartokite pagal poreikj arba kaip nurodo gydytojas.

Nerekomenduojama vartoti daugiau nei 8 tabletēs per dienā. Produkta taip pat galima vartoti ilgesni laikotarpī. Toki pači produkto dozē gali vartoti ir valkai nuo 6 metu amžiaus. Panaudojet sandariai uždarykite buteliuką.

**SUDĒTIS:** NeoBianacid yra **100 % natūralus ir bioloģiskai skaidus produktas, kurio sudedamosios dalys yra iš ekologinių ūkių**. Jo sudėtyje yra Poliprotect® – augalinio ir mineralinio kompleksa. Jo sudėtyje nera jokių sintetinių, pusiau sintetinių arba genetiškai modifikuotų medžiagų, o jo gamybos proceso metu nenaudojami tirpklai ar kitos chemiškai susintetintos medžiagos. Vienoje 1,55 g tabletēje yra: 528 mg Poliprotect®, natūralaus kompleksa, kurio sudėtyje yra **polisacharidi** (devezvū\*) ir vaistinių svilarožių\* LPME ekstrahuotū medžiagų; dehidratuotū alaviju lapu gelio\* – 105 mg) ir **mineralu** (klinīcių bei nahkolito (Limestone ir Nahcolite) – 423 mg); ramuneliū\* ir saldymedžio\* LPME flavonoidų ekstrahuotos medžiagos – 46 mg; cukranendrių cukraus\*, akacijas sakū; natūralaus mētru aromato. \*Sudedamoji dalis iš ekologinio ūkio

Kiekvienoje tabletēje yra 136 mg (3,4 mmol) kalcijs.

Produktu sudėtyje esančios ekstrahuotos frakcijos gaunamos naudojant išskirtinj technologinj procesā, vadinamą LPME („Liquid-Phase Microextraction“, skystos fazēs mikroekstrakcija), kurj sukurē Aboca vykdant tyrimus.

**NeoBianacid** vertinami pagal toliau nurodytus tris parametrus, jais remdamasis Aboca užtirkina šių sudėtingų natūralių produkta kokybę.  
1. Metabolinis skaitmeniniu atspaudu nustatymas naudojant artimosios infraraudonosios spinduliuiot spektroskopijos (NIRS) technologiją patvirtināt natūralaus produkto gamybos proceso validacijā.  
2. Sukibimo bandymas patvirtina skrandžio ir stempļs lāstīļi barjerā ir apsauginj poveikj.  
3. Polisacharidu kiekis  $\geq 1,8\%$  (molekulinė masė  $>20\,000$  daltonų).

**ISPĒJIMAI:** nenaudoti esant padidėjusiam jautrumui arba alergijai bet kuriai sudėtinei dailiai. Jei simptomi nepraeina, kreipkitės j gydytojā arba vaistininkā. Saldymedjie esančio glicirizino kiekis yra per mažas, kad galimai padidintu kraujospūdi.

**ŠALUTINIS POVEIKIS:** NeoBianacid apskritai yra gerai toleruojamas. Tačiau jeigu pastebite šalutinj poveikj, kuris gali būti susijęs su produkto ar jo vartojimu, informuokite apie tai savo gydytojā ir (arba) vaistininkā, taip pat gamintojā Aboca naudodamies šiam lapelyje pateiktais kontaktiniai duomenimis. Rimto incidento atveju taip pat informuokite savo Šalies kompetentingą institūciją.

**PERDOZAVIMAS:** remiantis turimais duomenimis, ūnom ar numatomu perdozavimo atvejų bendrojoje populiacijoje nera.

**SAVEIKA SU KITAIS VAISTAI, MEDICINOS PRIEMONĒM AR MAISTO PRODUKTAI:** produkta rekomenduojama vartoti likus mažiausiai dviem valandoms iki vaistu vartojimo arba praėjus tiek laiko po vaistu, ypač tetraciklinu, vartojimo.

Néra ūnomos NeoBianacid ir kitų medicinos priemonių ar maisto produktau savyeikos.

**LAIKYMAS IR GALIOJIMO PABAIGOS DATA:** laikyti kambario temperatūroje, atokia nuo karščio šaltiniu ir saugoti nuo šviesos. Saugoti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Galiojimo data taikoma nepanaudotam produkta, laikomam tinkamomis saļygomis. Žr. galiojimo pabaigos data, nurodytā ant pakutēs. Nenaudoti praėjus nurodytai galiojimo pabaigos datai. Rekomenduojame išsaugoti kartoninę dėžutę.

**PARDUODAMOS PAKUOTĒS:** 14 burnoje tirpstančių tablečių / 45 burnoje tirpstančios tabletēs po 1,55 g, stikliniame buteliuke.

**PASKUTINĒS PERŽIŪROS DATA:** 2024-04

**Saugos ir klinikinio veiksmingumo duomenų santrauka (SSCP)** Saugos ir klinikinio veiksmingumo duomenų santrauka apie šią priemonę pateikiama „Eudamed“ duomenų bazēje adresu <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>, ieškant šio „Basic UDI-DI“ kodo: 8032472BIOANaby2AA. Ji taip pat pateikiama gamintojo interneto svetainėje.

### LV NeoBianacid ar Poliprotect® pastiprina glotādu dabigā klājošo glotu aizsargājošo iedarbību.

NeoBianacid iedarbojas ātri, veido barjerai līdzīgu pārkājumu, kam piekrit sekojoši efekti:

- Aizsargābarja** – pateicoties augstai afinitatē ar kunčā un barības vada glotādu, tas veido pārkājumu, kas aizsargā un veicina fizioloģiskus atjaunošanas procesus.
- Lokāla skabes neutralizācija** – pastiprina kunčā glotu lokālās neutralizējošas ipašības, tādējādi novēršot skābju saskari ar kunčā glotādu un tās būjumu.
- Antiodoksants** – iedarbojas pret brivo radikālu radito kairinājumu. Šādā veidā glotādu tiek pasargāta no saskares ar kunčā sulu un kairinātājiem.

NeoBianacid izmaina skābumu, nenomēcot to, un tādējādi saglabā kunčā fizioloģisko funkciu un zaru mikrofloras darbību.

**INDIKĀCIJAS:** NeoBianacid ieteicams lietot, lai ārstētu **gastroezofageālo refluksu** un **vēdersāpes** (dispespjai ar sāpēm), kam raksturīgs skabes reflukss, grēmas, sāpes, kairinōs klepus un balso aizsmakums. NeoBianacid arī iestās tādu simptomu ārstēšanai, kas saistīti ar **gremošanas traucējumiem** (dispespjai bez sāpēm), piemēram, skābuma sajūta, smaguma sajūta un meteorisms pēc ēšanas. Šie simptomi var attārtoties vai rasties pēc pārēšanās. NeoBianacid var lietot kā **profilaktisku līdzekli** glotādu kairinājuma gadījumiem (piemēram, ieteicams lietot pirms kārtīgām īrējumiem) pateikusā zāles, kā arī garīga un fiziska stresa periodos. Līdzeklis ir piemērots lietošanai arī grūtneicības laikā, zīdīšanas laikā un bērniem no 6 gadu vecuma.

**LIETOŠANAS INSTRUKCIJA:** tablete jālieto, laujot tai izšķīst mutē vai sakošļājot to saskaņā ar sekojošajām norādēm:

- Ja simptomi nav regulāri,** lietotiet 1 tabletē pēc vajadzības.
- Ja ārstējat gastroezofageālo refluksu, sāpes un gremošanas traucējumus,** lietotiet 1 tabletē pēc maltītes un 1 tabletē vaka rātā pirms naktsmiera. Līdzekli var lietot pēc vajadzības vairākas reizes dienā pat ar mazu starplauku starp ienēšanās reizēm.
- Kombinācija** ar protona sūkņa inhibitoriem un H2 antagonistiem, kā arī pēc ārstēšanās pārtraukšanas lietot pēc vajadzības vai tā, kā norādījis jūsu ārstrs. Nav ieteicams lietot vairāk par 8 tabletēm dienā. Līdzekli var lietot arī ilglaicīgi. Līdzekli tādās pašas devās var lietot arī bērni no 6 gadu vecuma. Pēc lietošanas cieši aizvērt pudeli.

**SASTĀVĀ:** NeoBianacid ir **100 % dabīgs un bioloģiski noārdāms līdzeklis, kas pagatavots no bioloģiskajā lauksaimniecībā iegūtām sastāvdalām.** Tā sastāvā ir Poliprotect® – augu un minerālvilku kompleksa. Tas nesatur sintētiskas, pussintētiskas vai genētiski modifikuotas vielas, un tā rāzōšanas procesā netiek izmantoti šķidinātāji vai kādas citas ķīmiski sintezešanas vielas. Vienas 1,55 g tabletes satur: dabīgs Poliprotect® kompleks – 528 mg, kura sastāvā ir **polisaharidi** (malvas\* un altejas\* LPME ekstrakcijas frakcijas; dehidratētie alvejas lapu gels\* – 105 mg) un **mineralvielas** (kaljakkmens (Limestone) un nahkolits (Nahcolite) – 423 mg); kumelites\* un lakrīcas\* LPME flavonoidu ekstrakcijas frakcija – 46 mg; cukurniedru cukurs\*, akacijas sveķi, dabīgs piparmētru aromāts. \*Sastāvdala iegūta bioloģiskajā lauksaimniecībā.

Viena tablete satur 136 mg (3,4 mmol) kalcijs.

**Līdzekļa sastāvā esošās ekstrakcijas frakcijas tiek iegūtas ekskluzīvā tehnoloģiskā procesā, ko sauc par LPME (Liquid-Phase Micro Extraction – šķidrās fāzes mikroekstrakcija), ko uzņemums Aboca ir izstrādājis pētniecības rezultātā.**

**NeoBianacid** ir vērtēts attiecībā uz šādiem trim parametriem, ar kuriem Aboca nodrošina šo sarežģīto dabīgo līdzekļu kvalitāti.

- Digitāla metabolomikas datu leģūšana, izmantojot tuvo infrasarkanu staru spektroskopijas (NIRS) tehnoloģiju**
- Adhēzijas tests** apstiprina barjeras veidošanu un aizsargājošu iedarbību uz kunčā un barības vada šūnām.
- Polisaharidu daudzums  $\geq 1,8\%$  (molekulinė masė  $>20\,000$  daltonų).**

## ABOCA S.P.A. SOCIETÀ AGRICOLA

## FIRMA

Articolo:

LEAFLET

Prodotto:

NEOBIANACID COMPRESSE PAESI BALTI

Cod. Statistico: Y03

Cod. STELEA: 03-4

Codice:

PBLEA\_BIOAN-B

Colori: CMYK

**BRĪDINĀJUMI:** nelietot, ja ir paaugstināta jutība vai alerģija pret vienu vai vairākām sastāvdalām. Simptomu saglabāšanās gadījumā konsultēties ar savu ārstu vai farmaceitu. Glicīzīnā daudzums lākrīcā ir pārāk mazs, lai potenciāli paaugstinātu asinsspiedienu.

**BLAKUSPARĀDĪBAS:** NeoBianacid panesamība kopumā ir laba. Taču, ja pamānāt kādas blakusparādības, kas var būt saistītas ar līdzekļi vai tā lietošanu, informējiet savu ārstu un/vai farmaceitu, kā arī ražotāju Aboca, izmantojot šajā instrukcijā norādīto kontaktninformāciju. Nopietna negadījuma gadījumā, lūdz, informējiet arī savas valsts kompetentē iestādi.

**PĀRDOZEŠANA:** nemot vērā pieejamos datus, vispārējā populācijā nav zināmi un paredzami pārdozešanas gadījumi.

**MIJEDARBĪBA AR CITĀM ZĀLĒM, MEDICĪNIKĀM IERĪCĒM VAI PĀRTIKAS PRODUKTIEM:** līdzekli ieteicams lietot vismaz divas stundas pirms vai pēc zāļu, ipāši tetraciklinu, lietošanas. NeoBianacid mijedarbība ar citām medicīnas ierīcēm vai pārtikas produktiem nav zināma.

**UZGLABĀŠANA UN DERĪGUMA TERMIŅŠ:** uzglabāt istabas temperatūrā, atstatu no siltuma avotiem un pasargājot no gaismas ietekmes. Uzglabāt bēriem nepieejamā vietā. Derīguma termiņš attiecas uz pareizi uzglabātu līdzekli neatvērtā iepakojumā. Skatiet derīguma termiņu, kas norādīts uz iepakojuma. Nelietot pēc norādītā derīguma termiņa beigām. Ieteicams saglabāt kāstīti.

**IEPAKOJUMS PĀRDOŠANAI:** 14/45 mutē ūkstošās tabletēs, katras tabletēs svars 1,55 g, stikla pudelītē.

**PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS:** 04/2024

**Drošuma un kliniskās veikspējas kopsavilkums (SSCP).** Šis ierīces drošuma un kliniskās veikspējas kopsavilkums ir pieejams Eudamed datubāzē, sekojot saitei <https://ec.europa.eu/tools/eudamed> un meklējot šo „Basic UDI-DI“ kodu: 8032472BIOANAb2AA. Tas ir pieejams arī ražotāja tīmekļiņetā.

#### EE NeoBianacid Poliprotect®-iga tugevdab limaskesta katva loomuliku lima kaitsetoimet.

**NeoBianacid** mōjub kiiresti, moodustades barjārieftīga kile, millet on jārgmine toime:

- **kaitsev** – tānu heale ühtivusele gastroösophagealse limaskestaga moodustab see kile, mis kaitseb ja soodustab fisioloogilist paraneemist.
- **lokaalset ülehappesust neutraliseeriv** – tugevdab maos lima lokaalset neutraliseeriva omadusi, mis hoibā arā happe kokkupuute maos limaskestaga ja selle kahjustamise.
- **antioksidante** – omab vastutuoīmet vabade radikaalide pöhjustavale ärritusele.

Nii on limaskest kaitstud kokkupuute eest maomahla ja ärritajatega.

**NeoBianacid** mōjutab happesust seda maha surumata, et arvestada maos fisioloogia ning soolefloora funktsionidega.

**NÄIDUSTUSED:** NeoBianacid on soovitatav **gastroösophagealse refluksi ja kohuvalu** (valulik düspepsiā), mida iseloomustavad happerefluki, körvetised, valu, ärritav kõha ja düsponia, raviks. **NeoBianacid** on soovitatav ka **seedehäiretega** (valutu düspepsiā) seotud sümptome, nagu ülehappesust, raskustunne ja sõõmisiärjne puhitus, raviks. Need sümptomiid võivad olla korduvad või esineda pärast liigset sõõmist. **NeoBianacid** võib limaskesta ärritust pöhjustavas olukorras olla kasulik ka **ennetava meetmena** (nt pöletikuvastaste ravimite võtmisel või vaimse ja füüsiline stressi perioodil). Toode sobib kasutamiseks ka raseduse ja imetamise ajal ning üle 6 aasta vanustel lastel.

**KASUTUSJUHEND:** tabletti võttes tuleks sellel lastu sasa lahestuda või seda närida, järgides järgmisi juhtnööre.

- **Juhutiste sümptomite korral:** võtke vajaduse järgi 1 tablet.
- **Raviks gastroösophagealse refluksi, valu ja seedehäiretega korral:** 1 tablet pärast sõõmist ja 1 öhtul enne magamamineku. Lisaks võib toodet manustada vajaduse järgi mitu korda päevas, kui lühikesed aja tagant.
- **Koos prootonpumba inhibitoritega ja H<sub>2</sub>-antagonistidega ning ravi katkestamise perioodidel:** võtke vajaduse või arsti ettekirjutuse järgi.

Soovitatav on mitte välti rohkem kui 8 tabletti päevas. Toodet võib välti ka pikema aja jooksul. Toodet võivad samas annuses välti ka lapsed alates 6. eluaastast. Pärast kasutamist sulgege pudel tihedalt.

**KOOSTIS:** NeoBianacid on **100% looduslik ja biologune toode, mis on valmistatud mahetootmisest pärinevatest koostisosadest.** See sisaldab taime- ja mineraalipõhist kompleksi Poliprotect®. See ei sisalda suinteetilisi, poolsuunteelisi ega geneetiliselt muundatud aineid ning tootmisprotsessides ei kasutata lahusid ega muud keemiliselt sünteesitud aineid.

Üks 1,55 g tablet sisaldb: 528 mg looduslikku kompleksi **Poliprotect®**, mis sisaldb järgmisi: **polüsahariidid** (kassinaerise® ja hariliku altee® LPME-fraktsioonid; dehüdreeritud hariliku alao lehe geel® – 105 mg) ja **mineralaid** (lubjakivi ja nahkolit (Limestone and Nahcolite) – 423 mg); kummeli® ja lagritsa-magusjuure® **flavonoidide LPME-fraktsioon** – 46 mg; roosuhkur®; kummiaarabik; looduslik mündi lõhn- ja maitseaine. \*Koostisosad pärinevad mahetootmisest

Iga tablet sisaldb 136 mg (3,4 mmol) kaltsiumit.

Toote sisalduv ekstraktiivne fraktsioon saavutatakse eksklusiivse tehnoloogiilise protsessiga, mida nimetatakse LPME-ks (Liquid Phase Microextraction), mis on Aboca uuringute käigus välja töötatud tehnika.

**NeoBianacid'it** hinnatakse järgmiste kolme parametri alusel, mille järgi Aboca tagab nende looduslike toodete kvaliteedi kogu nende keerukuses.

1. **Metabolne digitaalne „sõrmejälg“, mida määrat lähiinfrapunaspektroskoopia (NIRS) tehnoloogia abil, mis kinnitab toote looduslikku koostist.**
2. **Adhesioonikatse, mis kinnitab kaitsekihi moodustamist ja kaitstvat toimet mao- ja söögitoru rakkudele.**
3. **Polüsahariidide sisaldis ≥ 1,8% (molekulmass > 20 000 daltonit).**

**HOIATUSED:** ärge kasutage, kui teil esineb üldintuldkkus või allergia mis tahes koostisosaga suhtes. Kui sümptomid ei kao, pöörduge arsti või apteekri poole. Lagritsa glüüsüürisini sisalduv on madalam kui see, mis võib põhjustada vimalikku vererõhu tõusu.

**KÖRVALTOIMED:** NeoBianacid on üldiselt hästi talutav. Kui teil tekib ükskööki milline kõrvaltoime, mis võib olla seotud toote või selle kasutamisega, teavitage sellest oma arsti ja/või apteekrit ning tootjat Aboca. Kontaktandmed leiate sellelt infolehelt. Ohjuhutumi korral teavitage ka riiklikku pädevat asutust.

**ÜLEANNUSTAMINE:** olemasolevate andmete põhjal ei ole üldpopulaatsioonis teadaolevaid üleannustamise juhtumeid.

**KOOSTOIMED MUUDE RAVIMITE, MEDITSIINISEADMETE VÕI TOIDUAINETEGA:** toodet on soovitatav välti vähemalt kaks tundi enne või pärast teiste ravimite, eeskätt tetratsüklinide, võtmist.

NeoBianacid'i ei esine teadaolevalt koostoimealte teiste meditsiiniuseadmetega ega toiduainetega.

**SÄILITAMINE JA KÖBLIKKUSAEG:** hoida toatemperatuuril, eemal soojuslikate test ja valguse eest kaitstuna. Hoida lastele kättesaadusmatas kohas. Köblikkusaeg kehtib avamata ja korrektselt säilitatud tootele. Vaadake pakendile märgitud aegumiskuupeäeva. Ärge kasutage pärast näidatud köblikkusaja möödumist. Soovitatav on pappkarb alles jäätta.

**MÜÜGIPAKEND:** 14/45 suus dispergeeruvat tabletti (1,55 g), klaaspudelis.

**VIIMANE REDAKTSIOON:** 04/2024

**Ohutuse ja kliniilise toimivuse kokkuvõte (SSCP).** Selle seadme ohutuse ja kliniilise toimivuse kokkuvõte on saadaval andmebaasis Eudamed aadressil <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>, kui otsite Basic UDI-DI koodi 8032472BIOANAb2AA. See on saadaval ka tootja veebisaidil.

#### SVEIKAI SIANDIENAI IR RYTOJAI

Jau daugiau nei 40 metu jmonē Aboca ieško žmogaus sveikatos sprendimy galmoje, gerbdamas žmogus künk ja aplink.

#### ABOCA TYRIMAS

Pripāžīstame sudetingu natūralu medžiagu gydomajai potenciālai ja perkeliame jaš is tradičijā i naujovi pasauli, remdamies irodymais pagrīstos medicinos ir sisteminēs medicinos kriterijās.

#### 100 % NATŪRALUS: IS LAUKU IKI GALUTINIO PRODUKTO

Mūsu produktai gamināni naudojant vertikaliai integroruotā sistemā, apimančią visķu nuo ekologinio ūkininkavīm ir mokslinjū tyrimū iki gamybās. Šio proceso metu naudojamā jokiū chemišķai susinisetintīr ja bioloģiskai neskaidziū medžiagā.

#### TVAI SVEIKATOS PRIEZIŪRA

Sveikata nērā tik individuo gerove, tai yra mūsu visu gerovē. Dēl to tirojū sveikata nejmanoma be tvarumo. Esame „Benefit Corporation“ (liet „nauda nesanti korporācija“). Savo darbu esame oficiāli išpareigojā teikti naudā bendumonejē ja aplinkai. Jeigu norīte daugiau sužinoti apie visus mūsu produktus, apsilankykite [www.aboca.com](http://www.aboca.com).

#### SÖDIENAS UN RÍTDIENAS VESELIBĀI

Uzņēmums Aboca ir veltījis vairāk nekā 40 gadus cilvēka veselībai nepieciešamo risinājumu meklēšanai dabā, vienlaikus rūpējoties par cilvēka organismu ja apkārtojē viidi.

#### ABOCA PĒTNIECĪBAS DARBIS

Mēs apzināmies sarežģītu dabisko vielu ārstniecisko potenciālu ja virzām tās no tradičijām uz inovāciju pasauli, pamatojoties uz pierādījumiem balstītās medicīnas (Evidence-Based Medicine) un sistēmiskās terapijas (Systems Medicine) kriterijiem.

#### 100 % DĀBĪGS LĪDZEKLIS: NO LAUKA LĪDZ GATAVAM PRODUKTAM

Mūsu līdzekļi tiek ražoti, izmantojot vertikāli integrētu sistēmu, kas ietver visu, sākot no bioloģiskas laukusaimniecības līdz pat zinātniskiem pētījumiem un ražošanai. Visā sājā procesā mēs neizmantojam vielas, kas ir sintētās ķīmiski un nav bioloģiski noārdāmas.

#### ILGTSPĒJĀGA VESELĪBĀS APRŪPE

Veselība ir svarīga ne tikai individum, tā ir svarīga mums visiem. Tādēļ ista veselība nav iespējama bez ilgtspējības. Mēs esam "Benefit Corporation". Savā darbābā esame oficiāli apņēmusies radīt labumu kopienai un videi. Lai uzzināt vairāk par visiem mūsu līdzekļiem, apmeklējet vietni [www.aboca.com](http://www.aboca.com)

#### TĀNASE JA HOMSE TERVISE HEAKS

Oleme Abocās juba üle 40 aasta otsinud loodusest lahendusi inimese terviseprobleemidele, austades seejuures inimkehrja keskkonda.

#### ABOCA UURING

Tuvastame looduslike ainete terapeutilist potentsiaali ja toome need teadmised innovatsioonimaailma vastavalt töenduspõhisile meditsiinile ja tava meditsiini kriteeriumidele.

#### 100 % LOODUSLIK: PÖLLULT VALMISTOOTENI

Meie toodet on valmistatud vertikālselt integrēritud süsteemi kaudu, mis hõlmab kõike alates mahepõllumajandusest ja teadusururingutele kuni tootmiseni. Kogu sellse protsessi käigus vältistame keemiliselt sünteesitud ja mitte-biologuvate ainete kasutamise.

#### JÄTKUSUUTLIK TERVISHOID

Tervis ei ole ainult üksikisu, vaid kogu hüvanguks. Seetõtt pole vimalik tervist edendada ilma jätkusuutlikkusesta. Me oleme Benefit Corporation. Oleme oma töös ametlikult pühendunud kogukonnale ja keskkonnale kasu toomisele. Lisainfot meie toodete kohta leiate veebisaidilt [www.aboca.com](http://www.aboca.com)

#### III klasēs MEDICINOS PRIEMONĒ


#### III klasēs MEDICĪNAS IERĪCE

#### Klass III MEDITSIINISEADE



0373

	<b>IEPAKOJUMA MATERIĀLI</b> Attiecībā uz līdzekļa izmēšanu skatiet vietējā reģiona noteikumus.
Kastē	PAP 21 > Kartons
Instrukcija	PAP 22 > Papirs
Väcipiš	C/ALU 90 > Pārsvarā aluminijs
Pudelite	GL 72 > Stikls

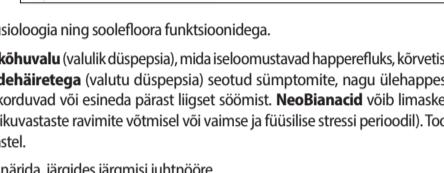

**Aboca S.p.A. Società Agricola - Località Aboca, 20 - 52037 Sansepolcro (AR) - Italia - [www.aboca.com](http://www.aboca.com)**

Jmonē veikia pagal ISO 9001 ja ISO 13485 kokybēs valdymo sertifikatus ja ISO 14001 aplinkos apsaugos valdymo sertifikātu.

Uzņēmums, kas darbojas saskaņā ar ISO 9001 un ISO 13485 sertifikātiem kvalitātes vadības sistēmai un ISO 14001 sertifikātu vides pārvaldības sistēmai.

Ettevōte tegutseb kvalitate dijitiņimise sūsteemi sertifikātā ISO 9001 ja ISO 13485 ning keskkonna halduse sūsteemi sertifikāti ISO 14001 alusel.



BLEA\_BIOAN-B