

# Fitonasal Pediatric

## CONGESTIONE NASALE

Lava, decongestiona e protegge  
la mucosa nasale

SOLUZIONE IPERTONICA BILANCIATA E STANDARDIZZATA

Senza conservanti

DISPOSITIVO MEDICO


Regolamento (UE) 2017/745

**100%**  
FORMULA NATURALE  
BIODEGRADABILE

**6+**  
MESI

senza  
glutine

**600**  
mOsm/kg

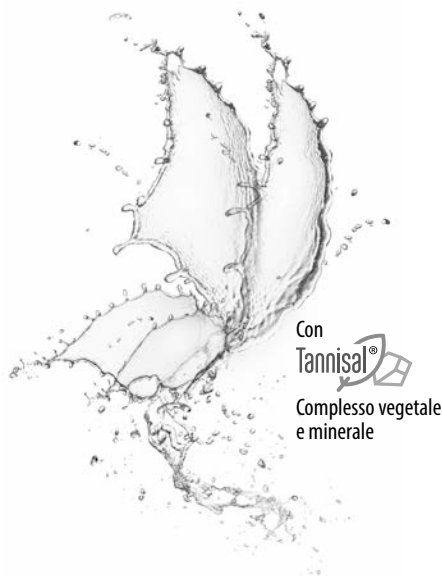

### SPRAY NEBULIZZATORE

**Fitonasal Pediatric** è un dispositivo medico che decongestiona, protegge la mucosa nasale e libera il naso dal muco in eccesso e dagli agenti patogeni, irritanti ed allergizzanti in esso intrappolati (*virus, batteri, fumo, smog, pollini, sostanze irritanti, etc.*). Svolge, infatti, **una fisiologica azione lavante, decongestionante e protettiva** come risultato dei seguenti meccanismi d'azione:



- **Osmotico bilanciato**  
Favorisce il richiamo di acqua dai tessuti congestionati senza causare irritazione e secchezza grazie all'osmolalità bilanciata e standardizzata (600 mOsm/Kg).
- **Astringente locale**  
Interagisce in modo aspecifico con alcune proteine infiammatorie presenti nei fluidi nasali e ne permette la rimozione.
- **Barriera**  
Forma un film sulla mucosa e la protegge dal contatto con gli agenti irritanti, favorendo il mantenimento dell'integrità della barriera epiteliale.
- **Antiossidante**  
Riduce i radicali liberi generati dall'infiammazione della mucosa.
- **Pulizia profonda**  
Facilita la rimozione del muco in eccesso e di patogeni, allergeni e altre sostanze in esso intrappolati grazie al getto nebulizzato a flusso continuo.

L'azione di pulizia profonda delle cavità nasali risulta particolarmente utile nel lattante, che non è in grado di soffiare il naso, e nel bambino, che non lo fa in maniera adeguata.

**Fitonasal Pediatric** si presenta in un contenitore ad erogazione spray dotato di tecnologia "bag on valve" (BOV) che contribuisce all'efficacia del prodotto e offre molteplici vantaggi:

- **Praticità** - la tecnologia BOV consente un'erogazione a flusso continuo ed in tutte le posizioni;
- **Ergonomicità** - il beccuccio erogante è stato pensato per rispettare anche il naso dei più piccoli;
- **Qualità** - il prodotto è contenuto in un sacchetto isolato dall'esterno, così da consentirne l'uscita ma non il rientro di aria, liquidi o altri residui;
- **Tutela dell'ambiente** - contiene gas propellente (Azoto) che rispetta lo strato di Ozono.

La linea si completa con Fitonasal Biopomata per un'ulteriore protezione della zona nasale e perinasale.



### INDICAZIONI

**Fitonasal Pediatric** è uno spray nasale indicato per la prevenzione ed il trattamento della congestione e delle irritazioni delle cavità nasali dovute a sindromi influenzali, raffreddore, riniti allergiche e sinusiti sia acute che croniche. L'uso del prodotto, pertanto, favorisce la respirazione e facilita il riposo notturno nei più piccoli. **Fitonasal Pediatric**, inoltre, può essere usato come trattamento coadiuvante in caso di tosse e mal di gola causati da scolo retronasale e otiti medie conseguenti a congestione nasale. Il prodotto è indicato a partire dai 6 mesi di età.



### MODO D'USO

Utilizzare almeno **2 volte al giorno**, mattina e sera e ogniqualvolta lo si ritiene necessario. Per un'azione efficace utilizzare **Fitonasal Pediatric** come di seguito indicato:

#### Da 6 mesi ad un anno di età

	1. Distendere il bambino su un fianco e inserire l'erogatore nella narice superiore, erogare il prodotto.		2. Ripetere l'operazione nell'altra narice distendendo il bambino sull'altro lato.
---	---	---	--

#### Sopra l'anno di età

	1. Inserire l'erogatore nella narice ed esercitare una leggera pressione per alcuni secondi.		2. Pulire il naso o, se possibile, soffiare e ripetere la nebulizzazione nell'altra narice.
---	--	---	---

Dopo ciascun utilizzo pulire l'erogatore con un panno umido e pulito e asciugare con cura.

**Fitonasal Pediatric** può essere utilizzato frequentemente e per periodi prolungati perché non contiene decongestionanti vasoconstrictori, non dà assuefazione, non irrita e non secca la mucosa.

Nel caso in cui **Fitonasal Pediatric** venga usato insieme a farmaci ad applicazione nasale si consiglia di distanziare di almeno 1 ora l'applicazione dei due prodotti.

## COMPOSIZIONE

**Fitonasal Pediatric** è un prodotto **100% naturale** e **biodegradabile** con Tannisal®, complesso vegetale e minerale.

Non contiene sostanze di sintesi, semisintesi o geneticamente modificate ed anche i processi di lavorazione con cui è ottenuto non utilizzano né solventi né altre sostanze di sintesi chimica.

1 ml di prodotto contiene: complesso naturale **Tannisal®** 6,8 mg, a base di **Tannini** (frazione estrattiva LPME di Amamelide - 0,2 mg) e **Minerali** (Salgemma di estrazione mineraria non trattato chimicamente - 6,6 mg); Acqua; Glicerina vegetale; Succo di Limone; Nahcolite (Bicarbonato di Sodio naturale).

**La frazione estrattiva contenuta nel prodotto è ottenuta attraverso un esclusivo processo tecnologico, chiamato LPME (Liquid-Phase Microextraction), messo a punto dalla ricerca Aboca.**

**Fitonasal Pediatric** è controllato secondo i seguenti parametri grazie ai quali Aboca garantisce la qualità dei prodotti naturali nella loro complessità.

**1. Impronta digitale metabolica tramite tecnologia NIR (near infrared spectroscopy)**

*a conferma della validazione del processo produttivo del prodotto naturale*

**2. Osmolarità 600 mOsm/Kg**

*a conferma dell'efficacia decongestionante e della tollerabilità*

## AVVERTENZE E PRECAUZIONI D'USO

Non utilizzare se presente ipersensibilità o allergia individuale verso uno o più componenti. Utilizzare esclusivamente per via nasale. Evitare il contatto con gli occhi, nel caso lavarli con acqua. Se i sintomi persistono consultare, comunque, il medico o il farmacista.

## EFFETTI INDESIDERATI

**Fitonasal Pediatric** è in genere ben tollerato. Tuttavia, se si nota la comparsa di un effetto indesiderato riconducibile al prodotto o al suo utilizzo, informare il medico e/o il farmacista e il Fabbriante Aboca ai contatti riportati su questo foglietto illustrativo. In caso di incidente grave informare anche l'autorità competente del proprio Paese.

## SOVRADOSAGGIO

Nella popolazione generale, in funzione dei dati disponibili, non sono noti né attesi fenomeni dovuti al sovradosaggio.

## INTERAZIONI CON ALTRI DISPOSITIVI MEDICI, MEDICINALI O ALIMENTI

Dai dati disponibili non sono attese interazioni di **Fitonasal Pediatric** con altri dispositivi medici, medicinali o alimenti.

## CONSERVAZIONE E SCADENZA

Conservare a temperatura ambiente in luogo fresco, asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato. La data di scadenza indicata sulla confezione resta invariata anche dopo la prima erogazione. Si raccomanda di conservare l'astuccio.

**Attenzione** - Contenitore pressurizzato: può scoppiare se riscaldato. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Proteggere dai raggi solari. **Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F.** Tenere fuori dalla portata dei bambini.

## CONFEZIONE VENDITA

**Fitonasal Pediatric:** Spray nebulizzatore da 125 ml

**DATA ULTIMA REVISIONE:** Novembre 2024

# Aboca

## PER LA SALUTE DI OGGI E DI DOMANI

Da oltre 40 anni noi di Aboca ricerchiamo nella Natura le risposte per la salute delle persone, nel rispetto dell'organismo e dell'ambiente.

## LA RICERCA ABOCA

Riconosciamo il potenziale terapeutico delle sostanze naturali complesse e le proiettiamo dal mondo della tradizione a quello dell'innovazione, secondo i criteri della Evidence Based Medicine e della Systems Medicine.

## 100% NATURALE: DALLA COLTIVAZIONE AL PRODOTTO FINITO

Realizziamo i nostri prodotti grazie ad un sistema verticalizzato che va dalla coltivazione biologica, alla ricerca scientifica fino alla produzione, escludendo l'utilizzo di sostanze di sintesi chimica e non biodegradabili lungo tutto il processo.

## LA SALUTE SOSTENIBILE

La salute non è solo un bene individuale, ma anche un Bene Comune. Per questo non può esistere una vera salute senza sostenibilità. Siamo una società Benefit e con il nostro lavoro ci impegniamo formalmente a portare un beneficio per la comunità e l'ambiente.

Per conoscere tutti i nostri prodotti, visita il sito [www.aboca.com](http://www.aboca.com)



DISPOSITIVO MEDICO Classe IIa  0477