


FitoroiD^{neo}

Хемороиди

Успокоява болката, паренето и сърбежа
като защитава лигавицата

С HELYDOL и етерично масло от Чаено дърво

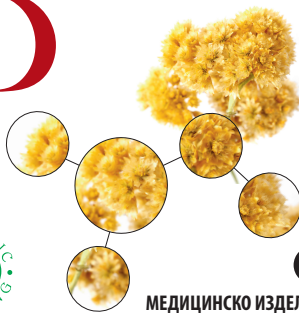

CE 0373

МЕДИЦИНСКО ИЗДЕЛИЕ Клас IIb

БИОКРЕМ ЗА РЕКТАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

ВЪН НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ: NeoFitoroid успокоява дразненето, овлажнява лигавицата и улеснява нейното нормализиране чрез 3 механизма на действие:

- 1. Мукоадхезивно действие:** прилепва към лигавицата, като образува филм с бариерен ефект, който я предпазва от контакт с дразнещите агенти;
- 2. Лубрикантно действие:** намалява триенето с изпражненията, като по този начин предпазва от раздразнение и застой на кръв в перианалната зона;
- 3. Антиоксидантно действие:** защитава лигавицата от свободните радикали, като опосредствено облекчава възпалението.

Освен това NeoFitoroid създава неблагоприятна среда за развитието на микроорганизми, оказва допълнително защитно действие и облекчава сърбежа. Освежаващите му свойства водят до бързо облекчаване на симптомите.

NeoFitoroid не съдържа кортикостероиди и анестетици, а благодарение на механизма си на действие не дразни и не изсушава лигавицата.

ПОКАЗАНИЯ: Лечение на хемороиди (вътрешни и външни) и на свързаните с тях симптоми като болка, парене и сърбеж в аналната и перианалната зона. Може да се използва и при наличие на анални рагади. Подходящ и за превенция, както и във всички случаи, които могат да доведат до раздразнение и/или застой на кръв в аналната и перианалната зона (запек, диария, неправилно хранене и начин на живот). Подходящ е за прилагане и по време на бременност и кърмене.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ: При външно приложение нанесете върху аналната и перианална зона и нежно масажирате.

За вътрешно приложение използвайте специалния ректален апликатор, който се завива към тубичката.

Нанесете от крема колкото е необходимо, така че да покриете засегнатите части. Използвайте продукта след дефекация и след старателно измиване на аналната и перианалната зона. За предотвратяване на дразненето, причинено от триене, продуктът може да се приложи преди дефекация, като се повтори отново и след това. След употреба развийте апликатора, измийте го внимателно с топла вода и сапун и затворете тубичката. Процедурата може да се повтори няколко пъти дневно, дори на близки интервали и за продължителни периоди от време.

СЪСТАВ – Функционални вещества: Сухи екстракти от цветни връхчета на хелихризум, липофилна фракция (Helydol)* и корени от бодлив залист*; дехидратиран лислен гел от алое вера*; воден разтвор от цветни връхчета на хелихризум*; маслен екстракт от цветни връхчета на жълт кантарион*; масло от жожоба*; масло от карите*; етерични масла от: чаено дърво, кипарис и лютив мента.

Съдържа още: глицерил стеарат, каприлов/капринов триглицерид, захароза дистеарат, захароза стеарат, цетиластеарил алкохол, растителен глицерин, трихидростеарин, растителни масла, хидрогенирани растителни масла, канделишов восък, кантанова гума, лимонена киселина, токоферол, натриев силикат, бензилов алкохол, калиев сорбат, натриев дехидроацетат, слънчогледово масло.

*Съставка от биологично земеделие

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Да не се използва при свръхчувствителност или индивидуална алергия към една или повече съставки. В случай че симптомите не се повлияват, препоръчваме да се консултирате с лекар.

Да се съхранява при стайна температура, далеч от източници на топлина и на защитено от светлина място. Да се държи на места, недостъпни за деца. Срокът на годност се отнася за неотворена опаковка при правилно съхранение.

СРОК НА ГОДНОСТ: Вж. срока на годност върху опаковката. Да не се използва след изтичане на указания срок на годност.

Препоръчва се използване на продукта до 4 месеца след отварянето.

ОПАКОВКА ЗА ПРОДАЖБА

Тубичка от 40 ml. Съдържа ректален апликатор.

Дата на последната редакция: 05/2015



ЗА ЗДРАВЕТО ДНЕС И УТРЕ

Aboca e Benefit Corporation и е сертифицирана B Corp. Ангажираме се да работим отговорно, устойчиво и прозрачно по отношение на общността, хората и околната среда. Доклад за въздействието ще намерите на www.aboca.com



Aboca S.p.A. Società Agricola

Località Aboca, 20 - 52037 Sansepolcro (AR) - Italia - www.aboca.com

Компанията притежава сертифицирани системи за управление на качеството ISO 9001 и ISO 13485 и за управление на околната среда ISO 14001.

Certified



Corporation



ОПАКОВКА МАТЕРИАЛИ


Външна опаковка	PAP 21	Хартия
Листовка	PAP 22	Хартия
Тубичка	ALU 41	Алуминий
Капачка	PP 5	Пластмаса
Опаковка за апликатор	PP 4	Пластмаса
Предпазител за апликатор	LDPE 4	Пластмаса
Апликатор	PP 5	Пластмаса
За изхвърляне проверете разпоредбите във вашия район на пребиваване.		

FitoroiD^{neo}

Tegobe sa hemoroidima

Ublažava bol, peckanje i svrab
i štiti sluzokožu

Sadrži HELYDOL i esencijalno ulje čajevca

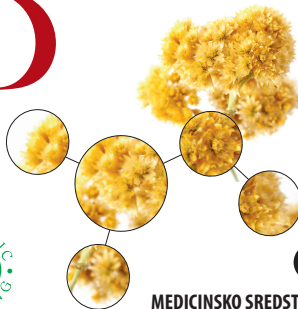

CE 0373

MEDICINSKO SREDSTVO Klasa IIb

ENDOREKTALNA BIO MAST

SR NAČIN DELOVANJA: NeoFitoroid smiruje iritaciju, štiti sluzokožu i pomaže u normalizaciji pomoću 3 mehanizma delovanja:

- 1. Prijanjanje na sluzokožu:** prijanja na sluzokožu i stvara zaštitni sloj koji je štiti od kontakta sa iritirajućim agensima;
- 2. Lubrikant:** ublažava trenje usled pražnjenja stolice i tako štiti od iritacije i perianalnog zatvora;
- 3. Antioksidans:** štiti sluzokožu od slobodnih radikala i tako indirektno ublažava upale.

Pored toga, NeoFitoroid stvara okruženje koje nije povoljno za razvijanje mikroorganizama, čime ostvaruje dodatno zaštitno dejstvo i ublažava svrab. Osvežavajuća svojstva daju brzo olakšanje od neugodnosti.

NeoFitoroid ne sadrži kortizone niti anestetike, a zahvaljujući mehanizmu delovanja, ne iritira i ne suši sluzokožu.

INDIKACIJE: Tretman hemoroida (unutrašnjih i spoljnih) i simptoma koji su povezani sa njima, među kojima su bol, peckanje i svrab u analnom i perianalnom delu. Sme da se koristi i u prisustvu analnih ragada.

Korisno je kao prevencija i u svim situacijama koje mogu da izazovu iritaciju i/ili začepljenje analne i perianalne zone (zatvor, dijareja, nepravilna ishrana i stil života). Preparat smeju da koriste i trudnice i dojilje.

NAČIN UPOTREBE: Prilikom spoljašnje upotrebe namazati i nežno utrljati u analnu i perianalnu zonu.

Prilikom unutrašnje upotrebe koristiti priloženi endorektalni aplikator koji se zavije na tubu. Naneti dovoljnu količinu masti da pokrije zahvaćeni deo.

Koristiti proizvod nakon pražnjenja stolice i pažljivog pranja analne i perianalne zone. Za postizanje preventivnog efekta i sprečavanje iritacije usled trenja, izvršiti tretman pre pražnjenja stolice i ponovo naneti proizvod nakon pražnjenja. Nakon korišćenja, odviti aplikator, temeljeno ga očistiti toplom vodom i sapunom, a zatim zatvoriti tubu masti. Može se naneti više puta tokom dana, čak i u malim razmacima i tokom dužih perioda upotrebe.

SASTAV – Funkcionalne supstance:

Suvi ekstrakti smilja cvetnih vrhova sa udelom lipofila (Helydol)* i korena ježovine*; Dehidrovani lisni gel aloje vere*; Vodeni rastvor cvetnih vrhova smilja*; Uljani ekstrakt cvetnih vrhova kantariona*; Ulje jojobe*; Ši maslac*; Esencijalna ulja od: čajevca, čempresa i pitome nane.

Sadrži i sledeće: gliceril stearat, kapril triglicerid, saharoza distearat, saharoza stearat, cetilstearylinalkohol, biljni glicerol, trihidroksistearyl, biljna ulja, hidrogenizovana biljna ulja, kandelila vosak, ksantan guma, citrinska kiselina, tokoferoli, natrijum silikat, benzil alkohol, kalijum sorbat, natrijum dehidroacetat, ulje suncokreta.

*Organski sastojak

UPOZORENJA: Ne koristiti u slučaju preosetljivosti ili alergije na neki od sastojaka.

U slučaju da se simptomi ne poboljšavaju, obratiti se lekaru. Čuvati na sobnoj temperaturi, daleko od izvora toplote i zaklonjeno od svetlosti. Držati van domašaja dece. Rok trajanja se odnosi na celokupan proizvod u pravilnim uslovima čuvanja.

ROK TRAJANJA: Rok trajanja je naveden na pakovanju. Ne koristiti nakon isteka naznačenog roka trajanja.

Preporučuje se da se proizvod iskoristi u roku od 4 meseca nakon otvaranja.

SADRŽAJ PAKOVANJA

Tuba od 40 ml. Sadrži endorektalni aplikator.

Datum poslednje verzije: 05/2015



ZA DOBRO ZDRAVLJE DANAS I U BUDUĆNOSTI

Aboca je kompanija koja posluje u korist opšteg dobra (Benefit Corporation) sa „B corp“ sertifikatom.

Nastojimo da poslujemo na odgovoran, održivi i transparentan način u pogledu zajednice i životne sredine. Opis odnosa firme prema društvu i životnoj sredini je dostupan na adresi www.aboca.com



Aboca S.p.A. Società Agricola

Località Aboca, 20 - 52037 Sansepolcro (AR) - Italia - www.aboca.com

Kompanija sa sertifikatom za upravljanje kvalitetom ISO 9001 i ISO 13485 i sertifikatom za sistem uticaja na životnu okolinu ISO 14001.

Broj rešenja: 001984502 2024 59010 009 000 515 059 04 003
od 08.11.2024

Ovlašćeni predstavnik: Sopharma Trading d.o.o. Beograd- Palilula
Viline Vode bb, 11 000 Beograd, Serbia

Certified



Corporation

MATERIJALI PAKOVANJA	
Pakovanje	PAP 21 > Papir
Uputstvo	PAP 22 > Papir
Tuba	ALU 41 > Aluminijum
Zatvarač	PP 5 > Plastika
Kesica za aplikator	PP 4 > Plastika
Zatvarač za aplikator	LDPE 4 > Plastika
Aplikator	PP 5 > Plastika
Pratite uputstva za odlaganje medicinskog otpada u skladu sa važećim propisima.	



BGSLEARO-B

Aboca S.p.A. Società Agricola

FIRMA

Articolo:
LEAFLET

Prodotto:
NEOFITOROID BG/SR

Cod. Statistico: Y02
Cod. STELEA: 02-2

Codice:
BGSLEARO-B

Colori CMYK