

Melilax Pediatric

STITICHEZZA OCCASIONALE E CRONICA

MICROCLISMI

Con **PRO MELAXIN**

complesso di mieli
e polisaccaridi
da Aloe vera e Malva

**Libera l'intestino senza irritare e
protegge la mucosa rettale**



**AZIONE RAPIDA
1-20 MINUTI**

DISPOSITIVO MEDICO
Regolamento (UE) 2017/745

senza
glutine

senza
lattosio

Per lattanti
e bambini

**0-6
ANNI**

MICROCLISMI

Melilax Pediatric è un **microclisma innovativo** a base di miele che **libera velocemente l'intestino senza irritare** ed è utile per il trattamento della **stitichezza occasionale, cronica** e in caso di evacuazione difficile e dolorosa anche in assenza di stipsi. **Melilax Pediatric** unisce un'equilibrata **azione evacuatoria** ad un'**azione protettiva e lenitiva** sulla mucosa rettale, utile per contrastare i fastidi, l'irritazione e l'infiammazione, presenti anche in caso di stitichezza. Il prodotto contiene **PROMELAXIN®**, un complesso di mieli di nettare e di melata appositamente selezionati e lavorati in base al loro contenuto di monosaccaridi, polisaccaridi e melanoidine, arricchito con la **frazione estrattiva polisaccaridica** da Aloe vera e Malva.

Può essere **utilizzato in modo occasionale o prolungato**. Per il suo **meccanismo d'azione fisiologico**, un utilizzo per periodi prolungati **aiuta a favorire la funzionalità intestinale e non interferisce con la flora batterica** (microbiota). Inoltre, **agisce in modo rapido**, normalmente tra 1 e 20 minuti.

La formulazione di Melilax Pediatric è 100% biodegradabile e non contiene sostanze artificiali.

COME AGISCE

Melilax Pediatric microclismi svolge una **fisiologica azione evacuatoria, protettiva e antinfiammatoria** sulla mucosa rettale come risultato dei seguenti meccanismi d'azione:



Osmotico bilanciato
Lubrificante
Barriera
Antiossidante

• Osmotico bilanciato

Stimola in modo fisiologico l'evacuazione, richiamando acqua nel retto in modo bilanciato e senza irritare. Questo contribuisce ad ammorbidire le feci.

• Lubrificante

Grazie alle sue proprietà mucosimili e alla sua viscosità, protegge la mucosa rettale durante il passaggio delle feci, mimando l'azione lubrificante del muco fisiologico.

• Barriera

Grazie alle sue proprietà muco-adesive è in grado di aderire in maniera specifica alla mucosa rettale, formando un film a effetto barriera che la protegge dal contatto con le sostanze irritanti presenti nelle feci. Questo promuove la cicatrizzazione e contrasta l'infiammazione.

• Antiossidante

Riduce i radicali liberi generati dall'infiammazione della mucosa.

INDICAZIONI

Melilax Pediatric microclismi è indicato per favorire in modo fisiologico l'evacuazione in caso di:



- Stitichezza occasionale e cronica;
- Necessità di ridurre lo sforzo evacuativo anche in assenza di stipsi

In ogni caso **Melilax Pediatric** può essere utilizzato anche in presenza di ragadi, emorroidi e intestino irritabile (dolore e gonfiore addominale). È indicato anche nei lattanti.

MODO D'USO

1) Aprire il microclisma rimuovendo il copricannula di sicurezza:

- Afferrare la ghiera rotonda bianca posta sopra il soffietto
- Con l'altra mano piegare il copricannula fino a provocarne la rottura e il completo distacco dalla ghiera
- Sfilare il copricannula

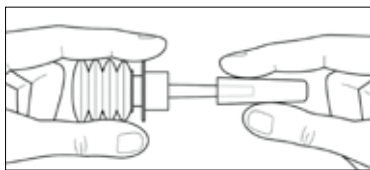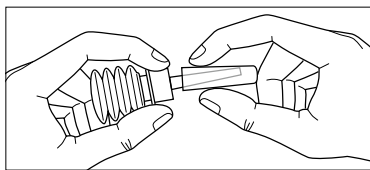

2) Applicare qualche goccia di prodotto nella zona perianale e introdurre delicatamente la cannula nel retto
3) Premere a fondo il microclisma e al termine dell'applicazione mantenerlo premuto fino ad estrazione completa della cannula, per evitare che il prodotto venga riaspirato.

Per la sua elevata viscosità, dopo l'utilizzo, può rimanere un po' di prodotto sul fondo del soffietto. Questo non influisce sulla funzionalità del prodotto.

MELILAX PEDIATRIC

È indicato per lattanti e bambini **da 0 mesi a 6 anni di età**.

POSOLOGIA

- **Bambini da 3-6 anni:** 1 microclisma da 5 g al bisogno. In caso di stitichezza ostinata, applicare 2 dosi consecutivamente.
- **Bambini da 1-3 anni:** 1 microclisma da 5 g al bisogno.
- **Lattanti da 0-1 anno:** metà microclisma da 5 g al bisogno.

Per facilitare l'applicazione del microclisma è preferibile posizionare il bambino sul lato sinistro con le ginocchia piegate verso l'addome.



Può essere utilizzato in modo occasionale o prolungato.



COMPOSIZIONE

Melilax Pediatric microclismi contiene **PROMELAXIN®**, complesso di mieli e Polisaccaridi da Aloe vera e Malva, frutto della ricerca Aboca. **La formulazione è 100% biodegradabile, non contiene sostanze di sintesi, semisintesi o geneticamente modificate e anche i processi di lavorazione con cui è ottenuto non utilizzano né solventi né altre sostanze di sintesi chimica.**

Un microclisma (5 g) contiene: complesso **PROMELAXIN® 3,66 g**, a base di **Mieli di nettare e di melata** (3,65 g) e **Polisaccaridi** (frazione estrattiva **LPME** di Malva e Aloe vera gel fogliare disidratato – 10 mg); Miscela idroglicerica; Succo di Limone; Olio essenziale di Lavanda.

Non contiene conservanti ed eccipienti di sintesi.

La frazione estrattiva contenuta nel prodotto è ottenuta attraverso un esclusivo processo tecnologico, chiamato LPME (Liquid-Phase Microextraction), messo a punto dalla ricerca Aboca.

Melilax Pediatric è controllato secondo i seguenti tre parametri, grazie ai quali Aboca garantisce la qualità dei prodotti nella loro complessità.

1. Impronta digitale metabolomica tramite tecnologia NIR (near infrared spectroscopy)

a conferma della validazione del processo produttivo

2. Test Barriera

a conferma dell'azione protettiva sulla mucosa rettale

3. Titolo Monosaccaridi ≥ 37%

AVVERTENZE E PRECAUZIONI D'USO

Non utilizzare se presente ipersensibilità o allergia individuale verso uno o più componenti. Se i sintomi persistono consultare, comunque, il medico o il farmacista. Il microclisma è monouso, pertanto non deve essere riutilizzato qualora se ne somministri la metà, come nel caso di lattanti.

EFFETTI INDESIDERATI

I microclismi **Melilax Pediatric**, in genere, sono ben tollerati. Tuttavia, se si nota la comparsa di un effetto indesiderato riconducibile al prodotto o al suo utilizzo, informare il medico e/o il farmacista e il Fabbricante Aboca ai contatti riportati su questo foglietto illustrativo. In caso di incidente grave informare anche l'autorità competente del proprio Paese.

SOVRADOSAGGIO

Nella popolazione generale, in funzione dei dati disponibili, non sono noti né attesi fenomeni dovuti al sovradosaggio.

INTERAZIONI CON ALTRI DISPOSITIVI MEDICI, MEDICINALI O ALIMENTI

Dai dati disponibili non sono attese interazioni di **Melilax Pediatric** con altri dispositivi medici, medicinali o alimenti.

CONSERVAZIONE E SCADENZA

Conservare a temperatura ambiente, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Tenere fuori dalla portata dei bambini. La data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato. Vedere la data di scadenza riportata sulla confezione. Non utilizzare dopo la data di scadenza indicata. Si raccomanda di conservare l'astuccio.

SINTESI RELATIVA ALLA SICUREZZA E ALLA PRESTAZIONE CLINICA (SSCP)

La sintesi relativa alla sicurezza e alla prestazione clinica del dispositivo è disponibile nella banca dati Eudamed al link <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>, ricercando il seguente codice Basic UDI-DI: 8032472MEXax1ZW. La stessa è inoltre disponibile sul sito web del fabbricante.

CONFEZIONE VENDITA

6 microclismi monouso con copricannula da 5 g ciascuno per lattanti e bambini da 0 a 6 anni.

DATA ULTIMA REVISIONE: Febbraio 2026

DISPOSITIVO MEDICO Classe III



MD



0373



INDICAZIONI DI SMALTIMENTO

Verifica le disposizioni del tuo Comune

RACCOLTA DIFFERENZIATA

Astuccio PAP 21 > CARTA

Foglietto PAP 22 > CARTA

Bustina PP 5 > PLASTICA

Soffietto e Cannula LDPE 4 > PLASTICA

Copricannula LDPE 4 > PLASTICA

 **Aboca S.p.A. Società Agricola** Località Aboca, 20
52037 Sansepolcro (AR) - Italia - www.aboca.com

Azienda con sistema di gestione qualità ISO 9001 e ISO 13485
e sistema di gestione ambientale ISO 14001 certificati.



LEA_MELPE-A