



Melilax



MIKROKLIZMA SA PROMELAXIN

EU PATENT GRANTED

EP2919857B1

Dvostruko dejstvo
Oslobađa debelo crevo bez iritacije
i štiti rektalnu sluzokožu

AKTIVNI KOMPLEKS OD
RAZLIČITIH VRSTA MEDA
I POLISAHARIDA IZ ALOJE
I SLEZA

gluten
free

Prilagođeno za osobe
sa netolerancijom
na gluten

MEDICINSKO SREDSTVO Klasa IIb

SR Melilax je inovativna mikrokлизma na bazi meda, koja objedinjuje umereno dejstvo pražnjenja sa zaštitnim i olakšavajućim dejstvom na rektalnu sluzokožu čime ublažava neprijatnosti, iritacije i upale koje se javljaju u slučaju zatvora.

Dvostruko dejstvo preparata Melilax se ostvaruje pomoću **PROMELAXIN**, aktivnog kompleksa od nektarskog meda i medene rose, koji su posebno izabrani i obrađeni na osnovu sadržaja monosaharida, polisaharida i melanoidina, a obogaćen je **delom sačinjenim od polisaharida** aloje i sleza.

INDIKACIJE

Melilax je indikovano za lečenje zatvora, čak i u slučaju prekomerne visceralne osetljivosti (kao što je u slučaju iritabilnog debelog creva), ragada i hemoroida.

Proizvod je pogodan za upotrebu i kod trudnica, dojilja i odojčadi.

NAČIN DELOVANJA


Melilax vrši dejstvo pražnjenja bez iritacije i time pokreće fiziološku i uravnoteženu stimulaciju za pokretanje pražnjenja stolice.

Pored toga, zahvaljujući svojstvima sličnim dejstvu sluzi i viskoznosti proizvoda, **Melilax** štiti rektalnu sluzokožu tokom prolaženja stolice imitirajući dejstvo lubrikanta fiziološke sluzi.


Posebno ta svojstva zajedno sa antioksidantskim dejstvom, pružaju proizvodu sposobnost zaštite i olakšavajućeg dejstva na sluzokožu, vršeći protivupalno indirektno dejstvo zahvaljujući fizičkim karakteristikama proizvoda.

NAČIN UPOTREBE

1) Otvoriti mikrokлизmu uklanjanjem sigurnosnog zatvarača za cev:

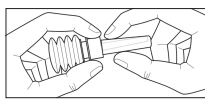

- Uхватiti prsten iznad bočice za istiskivanje
- Drugom rukom saviti zatvarač cevi dok se ne slomi i potpuno ukloni sa prstena

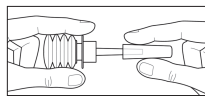

- Odviti zatvarač za cev

2) Naneti nekoliko kapi proizvoda u perianalnu zonu i pažljivo ugurati cev u rektum.

3) Pritisnuti mikrokлизmu do kraja i nakon primene je zadržati pritisnutom dok se cev u potpunosti ne izvuče kako se proizvod ne bi ponovo usisao u bočicu za istiskivanje.

UPOZORENJA

Ne koristiti u slučaju preosetljivosti ili alergije na neki od sastojaka. U slučaju upornog zatvora, važno je obratiti se lekaru i otkloniti sumnju na druge patologije.

Mikrokлизma je namenjena za jednokratnu upotrebu i ne sme ponovo da se koristi čim se primeni polovina doze, kao što je slučaj sa odojčadi.

Čuvati na sobnoj temperaturi, daleko od izvora toplote i zaklonjeno od svetlosti. Držati van domašaja dece. Rok trajanja se odnosi na celokupan proizvod u pravilnim uslovima čuvanja.

SASTAV

Funkcionalne supstance 73.2%

Promelaxin, aktivni kompleks od različitih vrsta meda i polisaharida aloje i sleza

Sadržaj: monosaharidi ≥50%, polisaharidi (molekularna težina >20.000 Da) ≥ 0,3%

Sadrži i sledeće: hidroglicerinska mešavina, limunski sok, esencijalno ulje lavande.

DOZIRANJE

- *Odrasli i deca iznad 12 godina: 1 mikrokлизma od 10 g* po potrebi. U slučaju upornog zatvora, primeniti 2 doze jednu za drugom.
- *Deca od 3 do 12 godina: 1 mikrokлизma od 5 g* po potrebi. U slučaju upornog zatvora, primeniti 2 doze jednu za drugom.
- *Deca od 1 do 3 godine: 1 mikrokлизma od 5 g* po potrebi.
- *Odojčad od 0 do 1 godine: pola mikrokлизme od 5 g* po potrebi.

Kako bi se olakšala primena mikrokлизme, postaviti dete na levu stranu sa nogama savijenim ka stomaku.

SADRŽAJ PAKOVANJA

Melilax Adult: 6 mikrokлизmi za jednokratnu upotrebu sa zatvaračem za cev za odrasle i decu iznad 12 godina, svaka od 10 g

Melilax Pediatric: 6 mikrokлизmi za jednokratnu upotrebu sa zatvaračem za cev za decu i odojčad, svaka od 5 g

ROK TRAJANJA

Rok trajanja je naveden na pakovanju. Ne koristiti nakon isteka naznačenog roka trajanja.

DATUM POSLEDNJE VERZIJE: 09/2020



ZA DOBRO ZDRAVLJE DANAS I U BUDUĆNOSTI

Aboca je kompanija koja posluje u korist opšteg dobra (Benefit Corporation) sa „B corp“ sertifikatom. Nastojimo da posluje na odgovoran, održiv i transparentan način u pogledu zajednice i životne sredine. Opis odnosa firme prema društvu i životnoj sredini je dostupan na adresi www.aboca.com

Formula za Melilax je 100% bio-razgradiva i ne sadrži sintetičke, polusintetičke ili genetski modifikovane supstance.

MATERIJALI PAKOVANJA			
Pakovanje	PAP 21	>	Papir
Uputstvo	PAP 22	>	Papir
Kesica	PP 5	>	Plastika
Bočica za istiskivanje i cev	LDPE 4	>	Plastika
Zatvarač za cev	LDPE 4	>	Plastika
Pratite uputstva za odlaganje medicinskog otpada u skladu sa važećim propisima.			



Broj rešenja: 515-02-03322-21-003 od 8.11.2021.

Aboca S.p.A. Società Agricola - Località Aboca, 20
52037 Sansepolcro (AR) - Italia - www.aboca.com
Kompanija sa sertifikatima za upravljanje kvalitetom ISO 9001 i ISO 13485
i sertifikatom za sistem uticaja na životnu okolinu ISO 14001.
Ovlašćeni predstavnik: Sopharma Trading d.o.o. Beograd- Palilula
Viline Vode bb, 11 000 Beograd, Serbia

